



MIIG[®] 115 Mixing Instructions

128800-5

Följande språk ingår i detta paket:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	中文-Chinese (sch)
Türkçe (tk)			

För ytterligare språk ska du besöka vår webbplats på www.wmt.com.


Klicka sedan på alternativet **Prescribing Information** (förskrivningsinformation).

För ytterligare information och översättningar ska du kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
P.O. Box 100
Arlington, TN 38002
U.S.A.

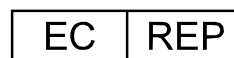

Wright Medical EMEA
Krijgsman 11
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

* **CE-märkningen för överensstämmelse tillämpas i enlighet med beställningsnummer och visas på ytteretiketten, om tillämpligt.**

Rx ONLY
November 2009
Tryckt i USA

MIIG™ 115

Minimalt invasivt, injicerbart grafft (128800-5)

Indikationer

MIIG™-pastan är avsedd att injiceras i öppna benhåligheter som inte är av kritisk vikt för skelettsystemets benstrukturs stabilitet (dvs. extremiteter, ryggrad och bäcken) och att härddas *in situ*. Dessa öppna benhåligheter kan vara bendefekter som skapats kirurgiskt eller bendefekter som skapats genom traumatisk skada på benet. MIIG™-pastan är ett benfyllmedel som resorberas och ersätts med benvävnad under läkningsprocessen.

MIIG™-pastan som härddas *in situ* utgör ett fyllmedel för öppna hålrum som kan förstärka tillfällig hårdvara (t.ex. K-trådar) vilket kan hjälpa till att stödja benfragment under ingreppet. Den härdade pastan verkar endast som ett tillfälligt stödmedium och är inte avsedd att ge strukturellt stöd under läkningsprocessen.

BLANDNINGSANVISNINGAR

1•1•5
1 minuts blandnings- och
preparerings-tid
1 minuts injektionstid
5 minuters stelningstid

VIKTIGT! Börja inte förrän grafftplatsen har preparerats och är redo för injektion. En lämplig nål bör placeras under röntgen innan blandningen påbörjas.




Steg 1

- Placera nålen i defekten under röntgengenomlysning.



Steg 2

- Avlägsna kolven från sprutan och lägg åt sidan.

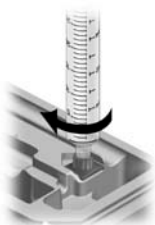

Steg 3

- Anslut sprutan till den förplacerade röda sprutkapsylen.



Steg 4

- Om du använder miniMIIG™-sprutan ska du sticka in den medföljande tratten i sprutan.
- Håll all tillhandahållen koksaltlösning in i sprutan.



Steg 5

VIKTIGT! STEG 5 – 8 BÖR FULLGÖRAS INOM 1 MINUT.

- Häll försiktigt allt pulver över vätskan.



Steg 6 (utför inom ca 40 sekunder)

- Avlägsna tratten om du använder miniMIIG™-satsen.
- Använd den medföljande spateln för att blanda ihop pulvret och lösningen. Du kan "tvinna" spateln mellan fingrarna för att underlätta blandningsprocessen.


VIKTIGT! Det tar ca 30 sekunder för att detta material att "vätas ut". Det är mycket viktigt att du inte lägger till mer vätska i sprutan.



Steg 7

- Avlägsna sprutan från hållaren.
- För in kolven i sprutans cylinder.
- Vänd upp och ned på sprutan

och knacka lätt på den för att avlägsna överflödigt luft högst upp i sprutan (höger).

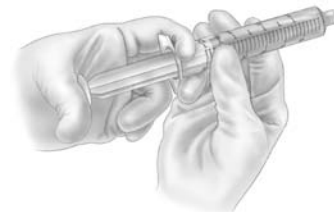

Steg 8

- Avlägsna sprutans röda kapsyl.
- Innan du ansluter tillförselnålen ska du avlägsna överflödigt luft genom att föra fram kolven till indicerad volym på sprutan.
 - **miniMIIG™ = 5 ml**
 - **MIIG™115 = 15 ml**



Steg 9

- Fäst sprutan vid den förplacerade nålen.
- Injicera pasta omedelbart in i defekten.
- Undvik överfyllning av benhålan eller komprimering av behandlingsområdet.

Materialrester kan lämnas kvar i sprutan. Mängden av materialrester är relativ till hur väl användaren följer anvisningarna om blandning och utdrivning i denna handledning.

OBS!

Pastan bör låtas stelna innan slutlig hårdvaruplacering (ca 5-7 minuter).