



Blandeinstruktioner for IGNITE®

129596-4

Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

Dansk (da)

Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog.

Klik dernæst på valgmuligheden **Prescribing Information** (Ordinationsoplysninger).

Kontakt den lokale producent eller forhandler for yderligere oplysninger og oversættelser.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002
U.S.A.



Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

* CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant.

Rx ONLY
September 2012
Trykt i USA

IGNITE[®]

Injektionsstimulus for callusdannelse efter fraktur
129596-4

Brugsanvisning
Blandeinstruktioner

FORBEREDELSE AF STED*

TRIN 1

Lokalisér defekt under fluoroskopisk kontrol med BLÅ 8G kanyle og trokar.




TRIN 2 (valgfrit)

Hvis det ønskes at sprænge fibrøst væv inden i defekten, skal der anvendes en fejende bevægelse fra side til side.



TRIN 3

Fjern trokar og indsæt IGNITE[®] levator, idet markørerne sættes på linje inden de smækkes sammen. Dan et subperiostealt område til transplantatinjektion.

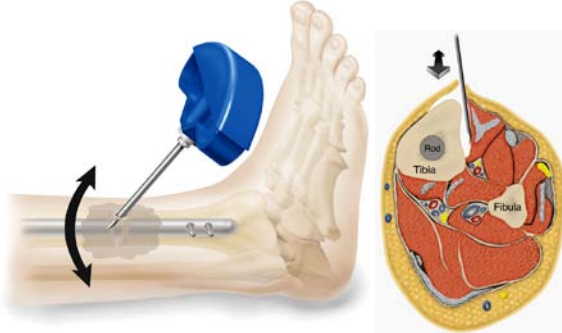

TRANSPLANTATFORBEREDELSE

TRIN 4

Afsug 20 ml knoglemarvspunktat med standard teknik med den GRØNNE 11G kanyle og sprøjte. Sæt til side.



TRIN 5

Fjern det BLÅ stempel fra 30 ml sprøjten. Drej derefter stemplet med uret indtil det er fuldstændigt sikret på sprøjteholderen i blisterpakken.



TRIN 6

Tilføj knoglemarvspunktat til 30 ml sprøjten.



TRIN 7

Tilføj forsigtigt IGNITE[®] pulver oven på knoglemarvspunktatet.

BEMÆRK: Når først IGNITE[®] pulveret er kombineret med knoglemarvspunktatet, skal blanding og injektion fuldføres indenfor 5 minutter.



TRIN 8

Bland til en jævn konsistens med den medfølgende spatel.

BEMÆRK: Sørg for at der ikke er nogen klumper tilbage på bunden.



TRIN 9

Drej og træk sprøjtecyklinderen OG hættten væk fra blisterpakken. Sæt sprøjtehætten godt fast og indsæt forsigtigt det BLÅ stempel i sprøjtecyklinderen.



TRIN 10


Løsn sprøjtehætten. Udtøm luft ved at vende sprøjten på hovedet og fremføre stemplet. Fjern sprøjtehætten.



INJICÉR TRANSPLANTATKOMPOSIT TRIN 11


Dok transplantatsprøjten på den forud placerede kanyle. Injicér IGNITE[®] komposittransplantat i den subperiosteale lomme.

BEMÆRK: Hvis injektion virker vanskeligt, skal kanylen repositioneres.

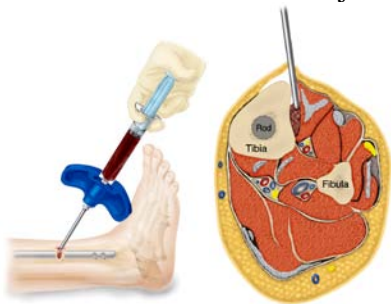

TRIN 12

Kanylen skal efter injektion forblive uforstyrret i 3-5 minutter (for delvis koagulation). Træk langsomt kanylen tilbage i små ryk for at minimere tilbageløb.

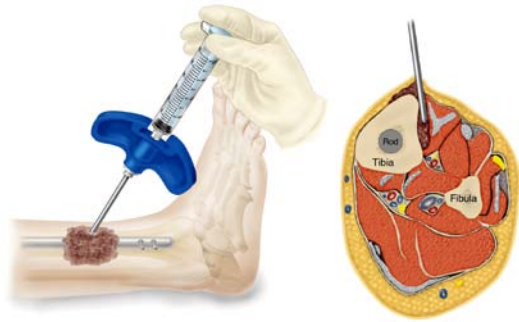

*Korrekt kirurgisk teknik er nødvendigvis lægens ansvar. De forudgående retningslinier gives udelukkende som anbefalet teknik. Hver enkelt kirurg skal evaluere teknikernes egnethed baseret på hans eller hendes egen medicinske træning og erfaring.

TM Varemærker og [®] Registrerede mærker tilhørende Wright Medical Technology, Inc. Dækket af et eller flere af følgende patenter. Amerikanske patenter 5.614.206; 5.807.567; 6.030.636. Patenter anmeldt. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.