



## Οδηγίες ανάμιξης IGNITE®

129596-4

Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

Ελληνικά (el)

Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της εταιρείας μας [www.wmt.com](http://www.wmt.com)

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Prescribing Information** (Πληροφορίες συνταγογράφησης).

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις.



CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
5677 Airline Road  
Arlington, TN 38002  
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
The Netherlands

\* Η σήμανση συμμόρφωσης CE ισχύει σύμφωνα με τον αριθμό καταλόγου και εμφανίζεται στην εξωτερική ετικέτα, εάν εφαρμόζεται.

Rx ONLY

Σεπτέμβριος 2012  
Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

# IGNITE<sup>®</sup>

Ενέσιμο ερέθισμα για πόρωση κατάγματος  
129596-4

Οδηγίες χρήσης  
Οδηγίες ανάμειξης

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ\*


### ΒΗΜΑ 1

Εντοπίστε το έλλειμμα υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο με βελόνα ΜΠΛΕ 8G και τροκάρ.




### ΒΗΜΑ 2 (προαιρετικό)

Εάν είναι επιθυμητή η καταστροφή ινώδους ιστού εντός του ελλείμματος, χρησιμοποιήστε μία επιμήκη κίνηση σάρωσης.

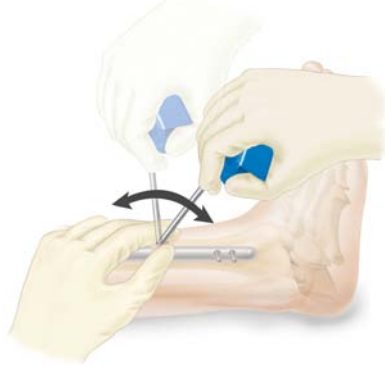

### ΒΗΜΑ 3

Αφαιρέστε το τροκάρ και εισαγάγετε τον ανυψωτήρα IGNITE<sup>®</sup>, ευθυγραμμίζοντας τους δείκτες πριν από την ένωσή τους. Δημιουργήστε έναν υποπερισστικό χώρο για να ενεθεί το μόσχευμα.

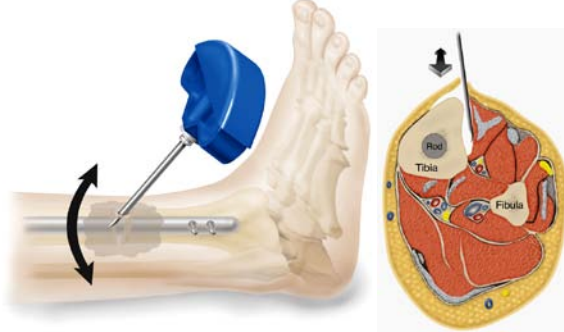

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

#### ΒΗΜΑ 4

Χρησιμοποιώντας βελόνα και σύριγγα ΠΡΑΣΙΝΗ 11G, αναρροφήστε 20cc μυελού των οστών με τυπική τεχνική. Αφήστε την στην άκρη.



#### ΒΗΜΑ 5

Αφαιρέστε το ΜΠΛΕ έμβολο από τη σύριγγα 30cc. Κατόπιν, με κίνηση κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, περιστρέψτε μέχρι να στερεωθεί με ασφάλεια στη βάση της σύριγγας στη φυσαλίδα.



## ΒΗΜΑ 6

Προσθέστε το αναρρόφημα μυελού των οστών στη σύριγγα 30cc.



## ΒΗΜΑ 7

Προσθέστε προσεκτικά σκόνη IGNITE<sup>®</sup> πάνω από το αναρρόφημα μυελού των οστών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μόλις η σκόνη IGNITE<sup>®</sup> συνδυαστεί με το αναρρόφημα μυελού των οστών, η ανάμειξη και η ένεση πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 5 λεπτών.



## ΒΗΜΑ 8

Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη σπάτουλα, αναμείξτε με ίση αναλογία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει συσσωρεύσεις σκόνης στον πυθμένα.



## ΒΗΜΑ 9

Με κίνηση κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, περιστρέψτε και τραβήξτε τον κύλινδρο της σύριγγας ΚΑΙ το πώμα από τη φυσαλίδα. Ασφαλίστε το πώμα της σύριγγας και εισαγάγετε προσεκτικά το ΜΠΛΕ έμβολο στον κύλινδρο της σύριγγας.



## ΒΗΜΑ 10

Ξεσφίξτε το πώμα της σύριγγας. Απομακρύνετε τον αέρα αναστρέφοντας τη σύριγγα και ωθώντας το έμβολο. Αφαιρέστε το πώμα της σύριγγας.



## ΕΝΕΣΤΕ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ


### ΒΗΜΑ 11

Αν έχει χρησιμοποιηθεί αραιωτικό με αποστειρωμένο νερό, χορηγήστε το υλικό απευθείας από τη σύριγγα. Μην ενέσετε μέσω βελόνας 8 G.

Προσαρτήστε τη σύριγγα του μοσχεύματος στην προ-τοποθετημένη βελόνα.


Ενέστε σύνθετο μόσχευμα **IGNITE<sup>®</sup>** στην υποπερισστική περιβάλλουσα δομή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ένεση παρουσιάζει δυσκολία, επανατοποθετήστε τη βελόνα.**

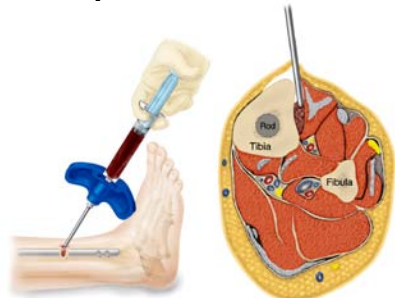

## ΒΗΜΑ 12

Μετά την ένεση, η βελόνα πρέπει να παραμείνει στη θέση της για 3-5 λεπτά (για μερική πήξη). Αφαιρέστε αργά τη βελόνα με μικρά βήματα για να ελαχιστοποιηθεί η παλίνδρομη ροή.

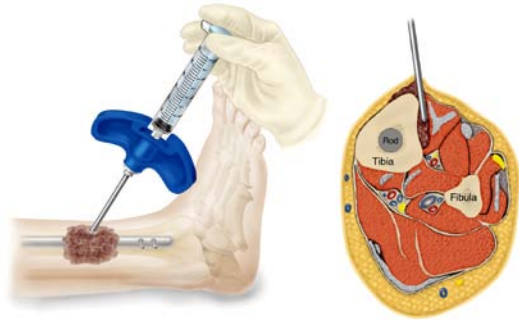

\*Οι κατάλληλες χειρουργικές τεχνικές είναι, αναγκαία, ευθύνη του επαγγελματία ιατρού. Οι παραπάνω οδηγίες παρέχονται μόνον ως προτεινόμενες τεχνικές. Κάθε χειρουργός πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα των τεχνικών με βάση της δική του ιατρική εκπαίδευση και πείρα.

™ Εμπορικά σήματα και ® κατατεθέντα σήματα της Wright Medical Technology, Inc. Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ 5.614.206, 5.807.567, 6.030.636 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας υπό κατοχύρωση. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.