



IGNITE® 混合说明

129596-4

本包装内有以下语言说明：

中文-Chinese (sch)

欲了解其它语言的说明，请访问我们的网站www.wmt.com。

然后点击 **Prescribing Information**

(处方信息) 选项。

有关额外信息和翻译版本，请与制造商或当地经销商联系。



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands


* 如果某产品符合CE合格标志要求，
会在外标签上印刷CE标志。

Rx ONLY

2012年9月
美国印刷

使用说明
混合说明

部位准备*

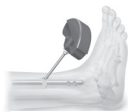

第 1 步

在荧光透视镜指示下，使用蓝色 8G 针头和套针定位缺损位置。



第 2 步 (可选)

如果需要处理缺损部位内部的干扰纤维组织，请使用纵向扫除动作。



第 3 步

取下套针并插入 IGNITE® 骨撬，在咬合前对齐标记。为移植注射建立骨膜下的空间。

移植准备



第 4 步

使用绿色 11G 针头和注射器，以标准方法抽取 20cc 骨髓。放于一旁。



第 5 步

从 30cc 注射器中取出蓝色活塞，然后以顺时针方向旋转，直至完全固定于泡沫内的注射器台架上。



第 6 步

将骨髓抽取液加入 30cc 注射器。



第 7 步

小心地将 IGNITE® 粉剂加在骨髓抽取液上。

注意：一俟 IGNITE® 粉剂与骨髓抽取液结合，应在 5 分钟内完成混合及注射。



第 8 步

使用提供的调拌刀，混合至均匀粘稠度。

注意：确保没有粉剂块留在底部。



第 9 步

以顺时针方向旋转并从泡沫中拉出注射器的筒和帽。固定注射器帽，并小心地将蓝色活塞插入注射器筒中。



第 10 步

松开注射器帽。倒转注射器并向前推动活塞以除去空气。取下注射器帽。

注射移植混合料



第 11 步

将移植注射器连接到预先放置的导针上。将 IGNITE® 混合移植材料注射到骨膜下的被膜内。

注意：如果感觉注射困难，可调整针头位置。



第 12 步

注射之后，针头必须保持静止不动 3~5 分钟（以待部分凝固）。慢慢地一点一点拔出针头，以尽量减少回流。

*正确的手术技法是专业医师不可或缺的职责。前述指导仅作为推荐技法提供。每一位外科医生必须根据其本人医疗培训和专业技术评估其手术技法的正确性。

所列 ™ 商标和 ® 注册商标归 Wright 医疗技术有限公司所有。

受以下一项或多项专利保护：美国专利 5,614,206、5,807,567、6,030,636。待批专利。©2002 Wright 医疗技术有限公司 (Wright Medical Technology, Inc.) 保留所有权利。