



## microMIG<sup>®</sup> HV

### INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA 131915-5

Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en [www.wmt.com](http://www.wmt.com)

y haga clic en la opción **Prescribing Information**

(Información para la prescripción).

**Para información adicional y traducciones, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.**



CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
5677 Airline Rd.  
Arlington, TN 38002  
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA  
Krijgsman 11  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

\* La marca de conformidad de la CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.

R<sub>x</sub> ONLY

Noviembre de 2009  
Impreso en EE.UU.



microMIIG® HV  
INJERTO INYECTABLE MÍNIMAMENTE INVASIVO  
INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA  
(131915-5)

**IMPORTANTE:** no comience hasta que el lugar del injerto esté preparado y listo para la inyección.

**Paso 1**

- Si utiliza un curvador de aguja, **primero retire el trocar metálico de la aguja.**




**Paso 2**

- Utilice el curvador para curvar la aguja y obtendrá una colocación exacta del material. Existen dos canales que permiten diferentes grados de curvatura. Inserte la aguja en la ranura ALTA para obtener una curvatura más pronunciada o en la ranura BAJA para obtener una curvatura más suave.



**Paso 3**

- Retire el émbolo de la jeringa y déjelo aparte.

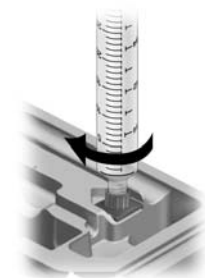

**Paso 4**

- Acople la jeringa al protector rojo previamente colocado en la bandeja.



**Paso 5**

- Inserte el embudo suministrado en la jeringa.
- Vierta el diluyente en la jeringa.

**NOTA:** realice los pasos 6 al 10 en un tiempo máximo de 5 minutos.


**Paso 6**

- Con el embudo colocado, vierta cuidadosamente todo el polvo en la jeringa.
- Retire el embudo.



#### Paso 7

- Utilice la espátula suministrada para mezclar el polvo con la solución durante **1 minuto**. Hacer girar rápidamente la espátula entre los dedos le facilitará el proceso de mezcla.

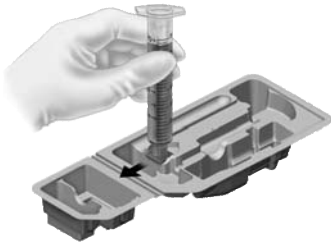

#### Paso 8

- Saque la jeringa y el protector de la bandeja (izquierda).
- Inserte el émbolo en el cuerpo de la jeringa hasta el primer "pestillo".
- Golpee suavemente la jeringa en posición invertida para que el aire sobrante se desplace a la parte superior de la jeringa (derecha).



#### Paso 9

- Retire el protector rojo de la jeringa.
- **Antes de acoplar la aguja de administración, empuje el émbolo hasta que quede 4 cc de material en la jeringa.**

#### Paso 10

- Acople la jeringa a la aguja.
- Inyecte la pasta en el lugar defectuoso.
- Evite sobrellenar el espacio óseo o comprimir el sitio de tratamiento.

NOTA: el Injerto Inyectable microMIIG® HV cuajará en aproximadamente 22-30 minutos *in situ*.

*El material residual se puede dejar en la jeringa. La cantidad de material sobrante puede deberse al tamaño del defecto y al uso del material.*