



**microMIG<sup>®</sup> HV**

**MENGINSTRUCTIES  
131915-5**

**Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:**

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

Ga voor andere talen naar onze website: [www.wmt.com](http://www.wmt.com)

Klik vervolgens op de optie **Prescribing Information**

(Voorschrijfinformatie).

**Neem voor aanvullende informatie en vertalingen  
contact op met de fabrikant of de lokale distributeur.**



CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
5677 Airline Rd.  
Arlington, TN 38002  
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA  
Krijgsman 11  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

**\* De CE-conformiteitsmarkering is per catalogusnummer aangevraagd  
en staat, waar van toepassing, op het buitenste etiket.**

**R<sub>x</sub> ONLY**

november 2009  
Gedrukt in de VS



microMIIG® HV  
 MINIMAAL-INVASIEVE INJECTEERBARE  
 PROTHESE (“MIIG”)  
 MEGINSTRUCTIES  
 (131915-5)

**BELANGRIJK:** Niet beginnen voordat de transplantatieplek geprepareerd en klaar voor de injectie is.

**Stap 1**

- Bij gebruik van een naaldbuiger **moet de metalen trocar eerst van de naald verwijderd worden.**




**Stap 2**

- Gebruik het buigapparaat voor het buigen van de naald, wat nauwkeurige plaatsing van het materiaal mogelijk maakt. Er zijn twee kanalen aanwezig om verschillende krommingsgraden mogelijk te maken. Steek de naald in de HOOG-gleuf voor een scherpere kromming, of in de LAAG-gleuf voor een flauwere kromming.



**Stap 3**

- Verwijder de zuiger uit de injectiespuit en leg hem opzij.

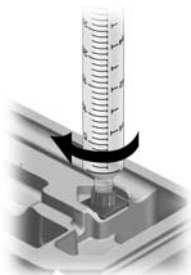

**Stap 4**

- Bevestig de naald op de vooraf geplaatste rode injectiespuitdop op de tray.



**Stap 5**

- Steek de bijgeleverde trechter in de injectiespuit.
- Giet het verdunningsmiddel in de injectiespuit.

**NB:** Voer stappen 6-10 uit binnen 5 minuten.


**Stap 6**

- Met de trechter op zijn plaats giet u alle poeder voorzichtig in de injectiespuit.
- Verwijder de trechter.



#### Stap 7

- Gebruik de bijgeleverde spatel voor het vermengen van de poeder en het oplosmiddel gedurende **1 minuut**. De spatel tussen uw vingers ronddraaien kan bij het mengproces behulpzaam zijn.

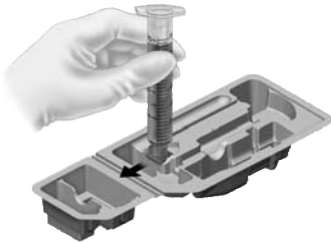

#### Stap 8

- Verwijder de injectiespuit met de dop van de tray (links).
- Steek de zuiger in de cilinder van de injectiespuit voorbij de eerste "stop".
- Tik voorzichtig op de injectiespuit in omgekeerde stand om de overtollige lucht tot bovenin de injectiespuit (rechts) te verplaatsen.



#### Stap 9

- Verwijder de rode dop van de injectiespuit.
- **Vóór aansluiting op de inbrengnaald voert u de zuiger op totdat er 4 cc materiaal in de injectiespuit overblijft.**

#### Stap 10

- Bevestig de injectiespuit op de naald.
- Injecteer de pasta in de te behandelen plaats.
- Vermijd teveel vullen van de botleemte of het samendrukken van de plaats van behandeling.

NB: De microMIIG® HV injecteerbare prothese verhardt na ongeveer 22-30 minuten *in situ*.

*Het resterende materiaal kan in de injectiespuit achterblijven. De hoeveelheid resterend materiaal kan te wijten zijn aan de omvang van de afwijking en aan materiaalgebruik.*