



microMIG[®] HV

混合说明 131915-5

本包装内有以下语言说明：

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

欲了解其它语言的说明，请访问我们的网站www.wmt.com。

然后点击 **Prescribing Information**

(处方信息) 选项。

有关额外信息和翻译版本，请与制造商或当地经销商联系。



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Rd.
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Krijgsman 11
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

* 如果某产品符合CE合格标志要求，会在外标签上印刷CE标志。

R ONLY

2009年11月
美国印刷

microMIIG® HV
微创可注射植入产品
混合说明
(131915-5)

重要提示：在植入部位做好注射准备前，不要开始操作。

步骤 1

- 如果要使用针头弯曲器，请首先取下针头上的金属套针。




步骤 2

- 使用弯曲器弯曲针头，以便将材料注射到准确的位置。注射器中的两个槽能够提供不同的弯曲度。将针头插入 **HIGH**（高弯曲度）槽中能够获得较大的弯曲度，将其插入 **LOW**（低弯曲度）槽中能够实现较小的弯曲度。



步骤 3

- 取下注射器的活塞，放在一旁。

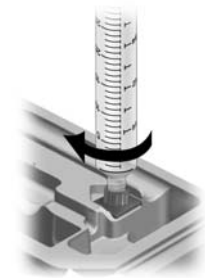

步骤 4

- 将注射器接到托盘中预置的红色注射器帽上。



步骤 5

- 将提供的漏斗插入到注射器中。
- 将稀释液倒入注射器中。

注意：在五分钟内完成步骤 **6-10**。


步骤 6

- 放置好漏斗后，小心地将所有粉剂倒入注射器中。
- 取走漏斗。



步骤 7

- 使用提供的调拌刀将粉剂和混合液混合一分钟。在指间旋转调拌刀有助于更好地混合。

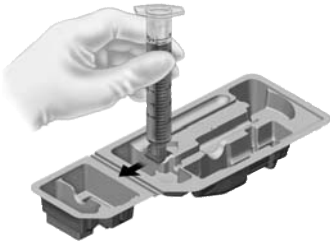

步骤 8

- 将注射器和注射器帽从托盘上一同取下 (见左图)。
- 将活塞插入到注射器筒中，越过第一道“标线”。
- 倒转注射器，轻轻磕击，使多余空气跑到注射器顶部 (见右图)。



步骤 9

- 取下红色注射器帽。
- 在将注射器连接到注射针头之前，推动活塞，直至注射器中存留 **4cc** 材料。

步骤 10

- 将注射器连接到针头。
- 将糊剂注射到缺损部位。
- 避免过度填充骨腔或压迫治疗部位。

注意：microMIIG® HV 可注射植入材料将在约 **22-30** 分钟内原位凝固。

剩余材料可留在注射器内。剩余材料的数量取决于缺损面积和材料用量。