



microMIIG® HV

KARIŞTIRMA TALİMATI
131915-5

Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com.

Sonra **Prescribing Information** (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

Ek bilgi ve tercüme için lütfen üretici veya yerel distribütör ile irtibat kurun.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Rd.
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Krijgsman 11
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

*** CE-Uyumluluk İşareti katalog numarası başına uygulanır ve ilgili olduğu durumlarda dıştaki etikette görülür.**

R ONLY

Kasım 2009
A.B.D.'de basılmıştır

microMIIG® HV
MİNİMAL İNVAZİF ENJEKTE EDİLEBİLİR GREFT
KARIŞTIRMA TALİMATLARI
(131915-5)

ÖNEMLİ: Greftleme merkezi enjeksiyon için hazır olmadan karıştırmaya başlamayın.

Adım 1

- İğne eğici kullanıyorsanız, **ilk önce metal trokarı iğneden çıkarın.**




Adım 2

- Eğiciyi iğneye eğim vererek hassas malzeme yerleşimine imkan sağlamak üzere kullanın. Farklı kurvatür derecelerine imkan verecek iki kanal mevcuttur. Daha sert kurvatür elde etmek için iğneyi YÜKSEK yuvaya ve daha hafif kurvatür elde etmek için ALÇAK yuvaya monte edin.



Adım 3

- Plenseri şırıngadan çıkarıp bir kenara koyun.

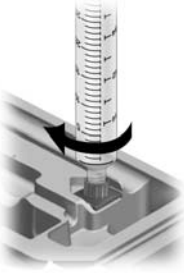

Adım 4

- Şırıngayı tabla üzerindeki önceden yerleştirilmiş kırmızı şırınga başlığı üzerine takın.



Adım 5

- Verilen huniyi şırıngaya takın.
- Seyrelticiyi şırıngaya dökün.

NOT: 6-10 arasındaki Adımları **5 dakika** içinde gerçekleştirin.


Adım 6

- Huniyi kullanarak bütün tozu dikkatle şırınganın içine dökün.
- Huniyi çıkarın.



Adım 7

- Toz ve çözeltiyi **1 dakika** boyunca karıştırmak için verilen spatulayı kullanın. Spatulayı parmaklar arasında döndürmek karıştırma işleminde yardımcı olabilir.

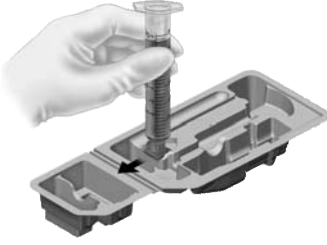

Adım 8

- Şırıngayı başlıkla birlikte tabladan (sol) çıkarın.
- Plenseri şırınga kovanına ilk "mandalın" ötesine yerleştirin.
- Fazlalık havayı şırınganın (sağ) üstüne çıkarmak için şırıngaya ters olarak hafifçe dokununuz.



Adım 9

- Kırmızı şırınga kapağını çıkarın.
- **Uygulama iğnesine bağlamadan önce, plenseri şırıngada 4cc malzeme kalana kadar ilerletin.**

Adım 10

- Şırıngayı iğneye takın.
- Macunu defekt yerine enjekte edin.
- Kemik boşluğunu fazla doldurmayın veya tedavi bölgesine bastırmayın.

NOT: microMIIG® HV Enjekte edilebilir Greft *in situ* olarak yaklaşık 22-30 dakikada sertleşecektir.

Şırınganın içinde fazla malzeme kalabilir. Kalan malzeme miktarı, defekt büyüklüğü ve kullanılan malzemeye göre değişebilir.