



# MIIG™ 115

## Blandningsanvisningar

128800-6

Följande språk ingår i detta paket:

Svenska (sv)

För ytterligare språk ska du besöka vår webbplats på [www.wright.com](http://www.wright.com).

Klicka sedan på alternativet **Prescribing Use** (Föreskrivet bruk). För ytterligare

information och översättningar ska du kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare.



CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Tornier SAS  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

\* CE-märkningen för överensstämmelse tillämpas i enlighet med beställningsnummer och visas på ytteretiketten, om tillämpligt.

**Rx ONLY**  
Februari 2019  
Tryckt i USA

# MIIG™ 115

## Minimalt invasivt, injicerbart grafft (128800-6)

### Indikationer

MIIG™-pastan är avsedd att injiceras i öppna benhåligheter som inte är av kritisk vikt för skelettsystemets benstrukturs stabilitet (dvs. extremiteter, ryggrad och bäcken) och att härddas *in situ*. Dessa öppna benhåligheter kan vara bendefekter som skapats kirurgiskt eller bendefekter som skapats genom traumatisk skada på benet. MIIG™-pastan är ett benfyllmedel som resorberas och ersätts med benvävnad under läkningsprocessen.

MIIG™-pastan som härddas *in situ* utgör ett fyllmedel för öppna hålrum som kan förstärka tillfällig hårdvara (t.ex. K-trådar) vilket kan hjälpa till att stödja benfragment under ingreppet. Den härdade pastan verkar endast som ett tillfälligt stödmedium och är inte avsedd att ge strukturellt stöd under läkningsprocessen.

## BLANDNINGSANVISNINGAR

**1•1•5**  
1 minuts blandnings- och  
preparerings-tid  
1 minuts injektionstid  
5 minuters stelningstid

**VIKTIGT!** Börja inte förrän grafftplatsen har preparerats och är redo för injektion. En lämplig nål bör placeras under röntgen innan blandningen påbörjas.



#### Steg 1

- Placera nålen i defekten under röntgengenomlysning.



#### Steg 2

- Avlägsna kolven från sprutan och lägg åt sidan.



#### Steg 3

- Anslut sprutan till den förplacerade röda sprutkapsylen.



#### Steg 4

- Om du använder miniMIIG™-sprutan ska du sticka in den medföljande tratten i sprutan.
- Håll all tillhandahållna koksaltlösning in i sprutan.



#### Steg 5

**VIKTIGT! STEG 5 – 8 BÖR FULLGÖRAS INOM 1 MINUT.**

- Häll försiktigt allt pulver över vätskan.



#### Steg 6 (utför inom ca 40 sekunder)

- Avlägsna tratten om du använder miniMIIG™-satsen.
- Använd den medföljande spateln för att blanda ihop pulvret och lösningen. Du kan "tvinna" spateln mellan fingrarna för att underlätta blandningsprocessen.


**VIKTIGT!** Det tar ca 30 sekunder för att detta material att "vätas ut". Det är mycket viktigt att du inte lägger till mer vätska i sprutan.



#### Steg 7

- Avlägsna sprutan från hållaren.
- För in kolven i sprutans cylinder.
- Vänd upp och ned på sprutan

och knacka lätt på den för att avlägsna överflödigt luft högst upp i sprutan (höger).

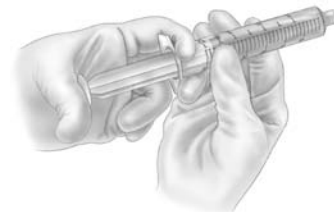

#### Steg 8

- Avlägsna sprutans röda kapsyl.
- Innan du ansluter tillförselnålen ska du avlägsna överflödigt luft genom att föra fram kolven till indicerad volym på sprutan.
  - **miniMIIG™ = 5 ml**
  - **MIIG™115 = 15 ml**



#### Steg 9

- Fäst sprutan vid den förplacerade nålen.
- Injicera pasta omedelbart in i defekten.
- Undvik överfyllning av benhålan eller komprimering av behandlingsområdet.

Materialrester kan lämnas kvar i sprutan. Mängden av materialrester är relativ till hur väl användaren följer anvisningarna om blandning och utdrivning i denna handledning.

#### OBS!

Pastan bör låtas stelna innan slutlig hårdvaruplacering (ca 5-7 minuter).