

WRIGHT.

TK

MIIG® 115 KARIŞTIRMA TALİMATLARI

128800-6

Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

Turkce (tk)

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com

Sonra **Prescribing Information**

(Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

**Ek bilgi ve tercüme için lütfen üretici veya yerel
distribütör ile irtibat kurun.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Rd.
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoordreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

* CE-Uyumluluk İşareti katalog numarası başına uygulanır ve ilgili olduğu durumlarda dıştaki etikette görülür.

R ONLY

Ağustos 2012
A.B.D.'de basılmıştır



Adım 4

- miniMIIG™ şırınga kullanıyorsanız, verilen huniyi şırıngaya takın
- Verilen salinin tamamını şırıngaya dökün.
-
-



Adım 5

ÖNEMLİ: 5-8 ARASI ADIMLAR 1 DAKİKA VEYA DAHA KISA SÜREDE TAMAMLANMALIDIR.

- Tozun tamamını sıvının üzerine dökün.
-
-




Adım 6 (yaklaşık 40 saniyede tamamlanır)

- MiniMIIG™ kiti kullanıyorsanız, huniyi çıkarın.
- Toz ve çözeltiyi karıştırmak için verilen spatulayı kullanın. Spatulayı parmaklar arasında "döndürmek" karıştırma işleminde yardımcı olabilir.




ÖNEMLİ: Bu malzemenin "ıslanması" yaklaşık 30 saniye sürmektedir. Şırıngaya başka sıvı eklememeniz çok önemlidir.

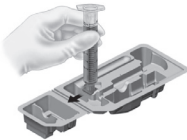

Adım 7

- Şırıngayı tutucudan çıkarın.
- Plenseri şırınga kovanına yerleştirin.
- Şırıngayı baş aşağı tutup hafifçe vurarak fazla havanın şırınganın ucuna gitmesini sağlayın (sağ tarafta).

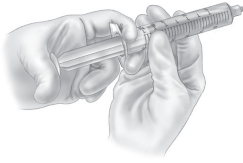

Adım 8

- Kırmızı şırınga kapağını çıkarın.
- Uygulama iğnesine bağlamadan önce, plenseri şırınga üzerinde gösterilen hacme ilerleterek fazla havayı çıkarın:
 - **miniMIIG™ = 5 cc**
 - **MIIG™ 115 = 15 cc**



Adım 9

- Şırıngayı önceden yerleştirilmiş iğneye takın.
- Macunu hemen bozukluk yerine enjekte edin.
- Kemik boşluğunu fazla doldurmayın veya tedavi bölgesine bastırmayın.

Şırınganın içinde fazla malzeme kalabilir. Kalan malzemenin miktarı, kullanıcının bu talimatlarda açıklanan karıştırma ve çıkarma sürelerine ne derece uyduğuna bağlı olacaktır

NOT:

Donanımın nihai yerleştirilmesinden önce macunun sertleşmesine izin verilmelidir (yaklaşık 5-7 dakika).