



# PRO-DENSE™ KEMİK GREFTİ İKAMESİ

## KARIŞTIRMA TALİMATI

### 150836-1

**Bu pakette aşağıda belirtilen dil mevcuttur:**

English (en)      Deutsch (de)      Nederlands (nl)      Français (fr)  
Español (es)      Italiano (it)      Português (pt)      Türkçe (tk)

For additional languages, visit our website [www.wright.com](http://www.wright.com)

Sonra **Prescribing Information** (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

**Ek bilgi ve tercüme için lütfen üretici veya yerel distribütör ile irtibat kurun.**



CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.


EC REP

Wright Medical UK Ltd.  
3rd Avenue  
Letchworth  
Hertfordshire, SG6 2JF  
UK

\* CE Uyumluluk İşareti katalog numarası başına uygulanır ve ilgili olduğu durumlarda dıştaki etikette görülür.

R ONLY

Ocak 2017  
A.B.D.'de basılmıştır.

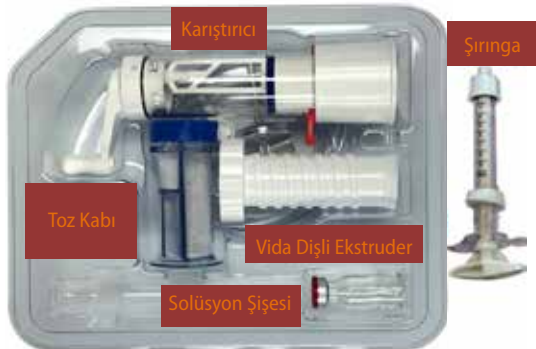

## PRO-DENSE™ KEMİK GREFTİ İKAMESİ (150836-1)

NOT: Grefte herhangi bir ek madde eklemeyin. Alternatif karıştırma solüsyonları kullanılması ve/veya karışıma diğer maddeler eklenmesi bu ürünün güvenlik, etkinlik ve sertleşmesini değiştirebilir.

1. (İSTEĞE BAĞLI) Materyalin hassas olarak yerleştirilmesini mümkün kılmak üzere iğneyi eğmek için eğici (sağlanmışsa) kullanın. İki eğme kanalı vardır. YÜKSEK (HIGH): agresif eğim, DÜŞÜK (LOW): hafif eğim.
2. İğneyi önceden floroskopi kılavuzluğu altında defekte yerleştirin.
3. Karıştırıcının kapağını çıkarın ve tüm toz ve solüsyonu ekleyin.



4. Kapağı tekrar takın ve vakum hortumunu vakum portuna takın. (İsteğe bağlı)



- 5a. Yaklaşık olarak 30 saniyede 50 devir  
**KARIŞTIRIN** (tek yönde).



- 5b. Karıştırmayı **DURDURUN** ve adım  
5c'ye başlamadan önce yaklaşık  
30 saniye bekleyin



- 5c. Yaklaşık olarak 15 saniyede 25 devir  
**KARIŞTIRIN** (tek yönde).

**Not: Macunu 3-5 dakika  
içinde enjekte edin.**



6. Vakum hortumunu (bağlıysa) ayırın, kapağı çıkarın ve fazlalığı kazıyın.



7. Kırmızı çıkıntıyı çıkarın ve şırınga portunu açığa çıkarmak üzere beyaz tabanı saat yönünün tersine döndürün.



8. Karıştırıcıyı yan tarafında tutarken, vida dişli ekstruderi tamamen oturuncaya kadar bir açıyla yerleştirin ve vida dişli ekstruderi, greft gösterildiği gibi şırınga portuna ancak girmeye başlayınca kadar ilerletin.



9. İletme şırıngasından şırınga kapağını çıkarın ve şırınga haznesini dikey konumda bastırarak oturtun.



10. Karıştırıcıyı yan tarafında tutarken şırınga doluncaya kadar ekstruderi döndürmeye/ilerletmeye devam edin. Şırıngayı ayırın ve şırınga kapağını tekrar takın.

(Not: 20 ml Kit için basamak 9-10'u hemen tekrarlayın)



11. Şırıngayı önceden yerleştirilmiş iğneye yerleştirin. Sabit başparmak basıncıyla enjeksiyona başlayın. **Tedavi bölgesini fazla doldurmaktan veya basınç uygulamaktan kaçının.**

(Not: Enjeksiyon fazla zorlaşırsa basamak 11a-11b'ye bakın)



Mekanik Yardım İin:

11a. evirme mekanizmasını etkinleřtirmek iin beyaz yakayı kaydırın ve tıkkatın.

11b. Enjeksiyona devam etmek iin piston sapını saat ynnde evirin.



**Not: Greft ~ 20 - 30 dakikada sertleřir.**

**Not:** Bir miktar materyal řiringada kalabilir. Kalan materyal miktarı kullanıcının bu talimatta ana hatları verilen karřtırma ve enjeksiyon srelerine uyumuna baęlıdır.

**Dikkat:** Macunun son donanım yerleřtirilmesinden nce sertleřmesi beklenmelidir. Sertleřirken **BOZMAYIN**.