



SUBSTITUTO DE ENXERTO ÓSSEO PRO-DENSE™

INSTRUÇÕES DE MISTURA 154099-0

Neste pacote estão incluídos os seguintes idiomas:

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)


Italiano (it)

Português (pt)

Türkçe (tk)

Para mais idiomas, visite o nosso website www.wright.com. Em seguida, clique na opção **Prescribing Information** (Informações de prescrição).

Para obter mais informações e as traduções, contacte o fabricante ou o distribuidor local.

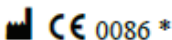

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** A marcação CE de conformidade é aplicada de acordo com o número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável.**

Rx ONLY

Julho de 2018
Impresso nos EUA

NOTA: não adicione quaisquer outras substâncias ao enxerto. A utilização de soluções de mistura alternativas e/ou a adição de outras substâncias à mistura pode alterar a segurança, a eficácia e endurecimento deste produto.

1. Retire o engaste metálico do frasco da solução. Ligue a seringa misturadora ao recipiente de pó com o adaptador CINZENTO e puxe a haste misturadora para trás.



2. Inverta o recipiente e bata suavemente para transferir TODO o pó para a seringa misturadora. Retire o recipiente de pó.



3. Retire a rolha do frasco e transfira TODA a solução para dentro da seringa misturadora.



4. Retire o adaptador CINZENTO e coloque a tampa misturadora BRANCA. Retire a manga do êmbolo, começando por separar a extremidade da pega da haste misturadora.




5. Misture durante 30 segundos movendo a haste misturadora para dentro e para fora, ao mesmo tempo que roda. **Certifique-se de que desfaz e incorpora o "rolhão" de pó perto da parte da frente e de trás da seringa.**



Nota: Injete a pasta no espaço de 5 min.

6. Puxe completamente para trás a haste misturadora e retire a tampa luer. Volte a ligar a manga do êmbolo à haste misturadora, posicionando primeiro a extremidade frontal no pistão, antes de encaixar no lugar.

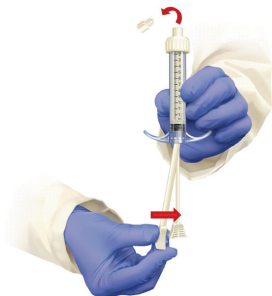

7. Ligue o acessório, agulha ou cânula pretendido. Injete o enxerto no defeito ósseo.



Nota: O enxerto endurecerá em aproximadamente 20-30 min.

NOTA: poderá ficar material residual na seringa. A quantidade de material restante tem a ver com a observância, por parte do utilizador, dos tempos de mistura e ejeção descritos nestas instruções.