



PRO-DENSE™ BENGRAFTSUBSTITUT

BLANDNINGSANVISNINGAR

154099-0


Följande språk ingår i detta paket:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

För ytterligare språk, besök vår webbplats på www.wright.com.

Klicka sedan på **Prescribing Information** (förskrivningsinformation).

För ytterligare information och översättningar ska du kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare.

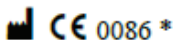

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** CE-märkningen för överensstämmelse tillämpas i enlighet med katalognummer och visas på ytteretiketten, om tillämpligt.**

Rx ONLY

Juli 2018
Tryckt i USA.

PRO-DENSE™ BENGRAFTSUBSTITUT (154099-0)

SV

OBS! Tillsätt inga ytterligare ämnen till graftet. Användning av alternativa blandningslösningar och/eller tillsats av andra ämnen till blandningen kan försämra produktens säkerhet, effektivitet och stelrandet av denna produkt.

1. Ta bort metalltång från flaska för lösning. Sätt fast blandningsspruta till puderbehållare med GRÅ adapter och dra tillbaka blandningsstaven.



2. Vänd behållaren upp och ner för att överföra ALLT pulver in till blandningssprutan. Ta bort pulverbehållare.



3. Ta bort flaskproppen och tillsätt ALL lösning till blandningssprutan.



4. Ta bort GRÅ adapter och sätt fast VIT blandningshylsa. Ta bort kolvhylsan genom att koppla bort handtagets ände från blandningsstaven först.




5. Blanda i 30 sekunder genom att röra blandningsstaven fram och tillbaka medan du roterar den. **Se till att bryta upp och inkorporera pulver-”pluggen” nära bak- och framsidan av sprutan.**



OBS! Injicera pastan inom 5 min.

6. Dra tillbaka blandningsstaven fullständigt och ta bort luerhylsan. Sätt fast kolvhylsan till blandningsstaven igen genom att placera främre ändan till kolven först, innan du klickar in den i rätt läge.

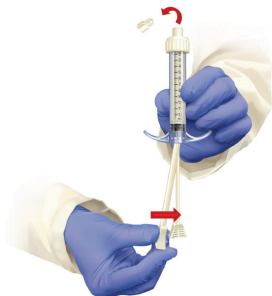

7. Sätt fast det önskade tillbehöret, nålen eller kanylen. Injicera graft in i bendefekten.



OBS! Graftet stelnar på cirka 20-30 min.

OBS! Kvarvarande material kan lämnas i sprutan. Mängden kvarvarande material står i relation till hur användaren följer tiderna för att blanda och trycka ut graftet i dessa anvisningar.