



# PRO-DENSE™ KNOGLETRANSPLANTAT

## BLANDEINSTRUKTIONER

154099-1

Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:


English (en)      Deutsch (de)      Nederlands (nl)      Français (fr)  
Español (es)      Italiano (it)      Português (pt)      Türkçe (tk)

Besøg vores websted på [www.wright.com](http://www.wright.com) for yderligere sprog.

Klik derefter på valgmuligheden **Prescribing Information**

(Ordinationsoplysninger).

**Kontakt producenten eller den lokale forhandler for at få yderligere oplysninger og oversættelser.**

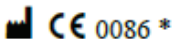

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant.**

**Rx ONLY**

Juli 2018  
Trykt i USA

**BEMÆRK:** Tilsæt ikke yderligere stoffer til transplantatet. Brug af andre blandingsopløsninger og/eller tilsætning af andre stoffer til blandingen kan ændre produktets sikkerhed, effektivitet og hærdning.

1. Fjern metalkraven fra hætteglasset med opløsningen. Sæt blandesprøjten på pulverbeholderen med den GRÅ adapter, og træk blandestaven tilbage.



2. Vend beholderen på hovedet, og bank let på den for at overføre ALT pulver til blandesprøjten. Fjern pulverbeholderen.




3. Fjern hætteglassets prop, og hæld AL opløsning i blandesprøjten.



4. Fjern den GRÅ adapter, og sæt den HVIDE blande-hætte på. Fjern stempelhylsteret ved først at koble håndtagsenden fra blandestaven.




5. Bland i 30 sekunder ved at bevæge blandestaven ud og ind, samtidig med at den roteres. **Sørg for at bryde pulver-“proppen” i sprøjtens for- og bagende og inkorporere den.**

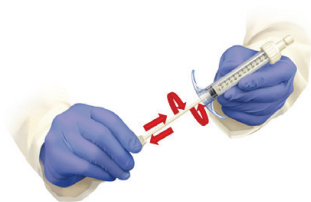

**Bemærk: Injicér massen i løbet af 5 min.**

6. Træk blandestaven helt tilbage, og tag luerhætten af. Sæt stempelhylsteret tilbage på blandestaven ved først at sætte den forreste ende på stemplet, inden hylsteret klikkes på plads.

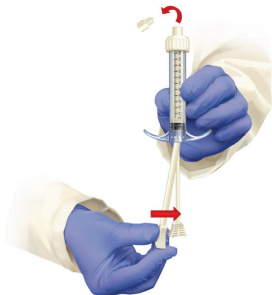

7. Påsæt en nål eller kanyle som relevant. Injicér protesemateriale ind i knogledefekten.



**Bemærk: Transplantatet vil størkne i løbet af ca. 20-30 min.**

**BEMÆRK:** Der kan være restmateriale tilbage i sprøjten. Mængden af restmateriale afhænger af brugerens overholdelse af de blande- og injiceringstider, der er angivet i disse instruktioner.