



## SUSTITUTO DE INJERTO ÓSEO PRO-DENSE™

### INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA


154099-1

**Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:**

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web [www.wright.com](http://www.wright.com) y haga clic en la opción **Prescribing Information** (Información para la prescripción).

**Para información y traducciones adicionales, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.**

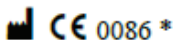

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* La marca de conformidad CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.**

**Rx ONLY**

Julio de 2018  
Impreso en EE. UU.

**NOTA:** No añada ninguna otra sustancia al injerto. El uso de otras soluciones de mezclado o la adición de otras sustancias a la mezcla podrían afectar a la seguridad, a la eficacia y al fraguado de este producto.

1. Retire el cierre metálico del vial de solución. Acople la jeringa de mezcla al recipiente de polvo con adaptador GRIS y tire de la varilla de mezcla hacia atrás.



2. Invierta el recipiente y golpéelo suavemente para transferir TODO el polvo a la jeringa de mezcla. Retire el recipiente de polvo.



3. Retire el tapón del vial y añada TODA la solución a la jeringa de mezcla.



4. Retire el adaptador GRIS y acople la tapa de mezcla BLANCA. Retire el manguito del émbolo desconectando el extremo del mango de la varilla de mezcla primero.




5. Mezcle durante 30 segundos moviendo la varilla de mezcla hacia delante y hacia atrás mientras la hace girar. **Asegúrese de romper e incorporar el «tapón» de polvo cerca de la parte trasera y delantera de la jeringa.**



**Nota: Inyecte la pasta en un plazo de 5 minutos.**

6. Tire de la varilla de mezcla hacia atrás hasta el tope y retire la tapa Luer. Vuelva a acoplar el manguito del émbolo sobre la varilla de mezcla colocando el extremo delantero sobre el pistón primero antes de encajarlo en su sitio.

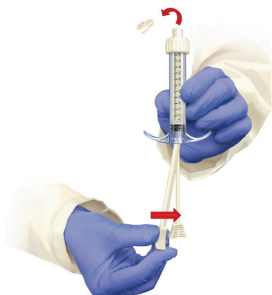

7. Acople el accesorio, la aguja o la cánula deseados. Inyecte injerto en el defecto óseo.



**Nota: El injerto fragua en unos 20 - 30 min.**

**NOTA:** Pueden quedar restos de material en la jeringa. La cantidad de material restante depende del cumplimiento por parte del usuario de los tiempos de mezclado y expulsión indicados en estas instrucciones.