



## SUBSTITUT OSSEUX PRO-DENSE™

### INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE


154099-1

**Les langues suivantes sont incluses dans ce paquet :**

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Pour d'autres langues, visiter notre site Web [www.wright.com](http://www.wright.com). Puis cliquer sur l'option **Prescribing Information** (Informations de prescription).

**Pour des informations et traductions complémentaires, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local.**

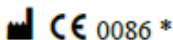

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* Le marquage CE de conformité est utilisé par numéro de catalogue et apparaît sur l'étiquette externe, le cas échéant.**

**Rx ONLY**

Juillet 2018  
Imprimé aux États-Unis.

**REMARQUE :** Ne pas ajouter de substances supplémentaires à la greffe. L'utilisation d'autres solutions de mélange ou l'ajout d'autres substances au mélange peuvent altérer l'innocuité, l'efficacité et la prise de ce produit.

1. Retirer le sertissage métallique du flacon à solution. Fixer la seringue de mélange au réservoir à poudre avec l'adaptateur GRIS et tirer la tige mélangeuse vers l'arrière.



2. Renverser le réservoir et tapoter pour transférer TOUTE la poudre dans la seringue de mélange. Retirer le réservoir à poudre.



3. Retirer le bouchon du flacon et ajouter TOUTE la solution dans la seringue de mélange.



4. Ôter l'adaptateur GRIS et fixer le bouchon de mélange BLANC. Retirer le manchon du piston en déconnectant d'abord l'extrémité de la poignée de la tige mélangeuse.




5. Mélanger pendant 30 secondes en déplaçant la tige mélangeuse d'avant en arrière tout en tournant. **Assurez-vous de briser et d'incorporer « le bloc » de poudre près de l'arrière et de l'avant de la seringue.**



**Remarque : Injecter la pâte dans les 5 minutes.**

6. Tirer complètement la tige mélangeuse vers l'arrière et retirer le bouchon luer. Remettre le manchon du piston sur la tige mélangeuse en plaçant d'abord l'extrémité avant sur le piston avant de l'enclencher.

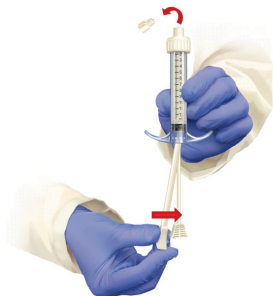

7. Fixer l'accessoire, l'aiguille ou la canule choisi. Injecter la greffe dans le défaut osseux.



**Remarque : La prise de la greffe intervient en 20 à 30 minutes environ.**

**REMARQUE :** Le matériau résiduel peut être laissé dans la seringue. La quantité de matériau restant dépend du respect par l'utilisateur des durées de mélange et d'injection indiquées dans ces instructions.