



# INNESTO OSSEO SOSTITUTIVO PRO-DENSE™

## ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE


### 154099-1

**Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:**

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Per altre lingue, visitare il sito web [www.wright.com](http://www.wright.com). Quindi fare clic sull'opzione **Prescribing Information** (Informazioni sulla prescrizione).

**Per ulteriori informazioni e traduzioni, contattare il fabbricante o il distributore locale.**

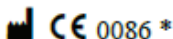

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* Il marchio di conformità CE è applicato per numero di catalogo e, se del caso, compare sull'etichetta esterna.**

**Rx ONLY**

Luglio 2018  
Stampato negli USA

**NOTA** – Non aggiungere alcuna sostanza supplementare all'innesto. L'uso di soluzioni di miscelazione alternative e/o l'aggiunta di altre sostanze alla miscela potrebbero compromettere la sicurezza, l'efficacia e la presa di questo prodotto.

1. Togliere la fascetta metallica dal flacone di soluzione. Collegare la siringa di miscelazione al contenitore della polvere mediante l'adattatore GRIGIO e tirare indietro l'asta di miscelazione.



2. Capovolgere il contenitore e picchiettare per trasferire TUTTA la polvere alla siringa di miscelazione. Rimuovere il contenitore della polvere.




3. Togliere il tappo dal flacone e versare TUTTA la soluzione nella siringa di miscelazione.



4. Togliere l'adattatore GRIGIO e collegare il tappo di miscelazione BIANCO. Togliere il manicotto dello stantuffo scollegando prima l'estremità dell'impugnatura dall'asta di miscelazione.




5. Miscelare per 30 secondi muovendo l'asta avanti e indietro mentre la si fa ruotare. **Assicurarsi di rompere e inglobare il "tappo" di polvere vicino alla parte posteriore e anteriore della siringa.**

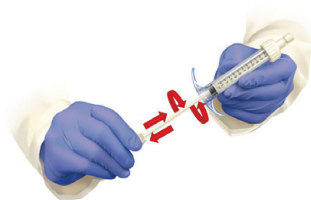

**Nota – Iniettare la pasta entro 5 minuti.**

6. Tirare completamente indietro l'asta di miscelazione e togliere il tappo Luer. Ricollegare il manicotto dello stantuffo sull'asta di miscelazione, posizionandone l'estremità anteriore sul pistone prima di farlo scattare in sede.

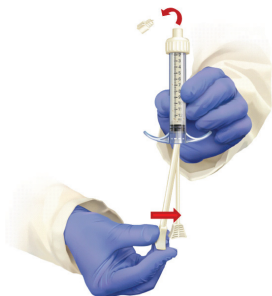

7. Collegare l'accessorio, ovvero l'ago o la cannula desiderati. Iniettare l'innesto nel difetto osseo.



**Nota – La presa dell'innesto richiede ~20-30 minuti.**

**NOTA** – Nella siringa può rimanere del materiale residuo. La quantità di materiale residuo dipende dal rispetto da parte dell'operatore dei tempi di miscelazione e di estrusione indicati nelle presenti istruzioni.