



## PRO-DENSE™ KNOCHENTRANSPLANTATERSATZ

### MISCHANLEITUNG

154101-0

**Dieses Paket enthält die folgenden Sprachen:**

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)


Português (pt)

Türkçe (tk)

Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website [www.wright.com](http://www.wright.com). Klicken

Sie auf die Option **Prescribing Information** (Verschreibungsangaben).

**Für weitere Informationen und Übersetzungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren zuständigen Vertriebspartner.**

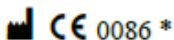

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* Die CE-Konformitätskennzeichnung gilt für spezifische Katalognummern und befindet sich sofern zutreffend auf dem Außenetikett.**

R<sub>x</sub> ONLY

Juli 2018  
Gedruckt in den USA.

**HINWEIS:** Dem Transplantatmaterial keine sonstigen Substanzen zugeben. Die Verwendung von anderen Mischflüssigkeiten und/oder der Zusatz von anderen Substanzen zur Mischung kann sich auf die Sicherheit, Wirksamkeit und Aushärtung dieses Produktes auswirken.

1. Den Metall-Crimpverschluss vom Fläschchen mit Lösung abnehmen. Die Mischspritze mit dem **ROTEN** Adapter am Pulverbehälter anbringen und den Mischstab zurückziehen.




2. Den Behälter umdrehen und leicht darauf klopfen, um das **GESAMTE** Pulver in die Mischspritze zu befördern. Den Pulverbehälter abnehmen.




3. Den Stopfen aus dem Fläschchen nehmen und die **GESAMTE** Lösung in die Mischspritze geben.



4. Den **ROTEN** Adapter abnehmen und die **WEISSE** Mischkappe aufsetzen. Die Kolbenhülle abnehmen, indem sie am griffseitigen Ende zuerst vom Mischstab gezogen wird.

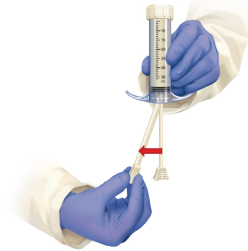


5. 30 Sekunden lang mischen, indem der Mischstab unter Drehbewegungen vor und zurück geschoben wird. **Dabei unbedingt darauf achten, dass auch das trockene Pulver am vorderen und hinteren Ende der Spritze untergemischt wird.**

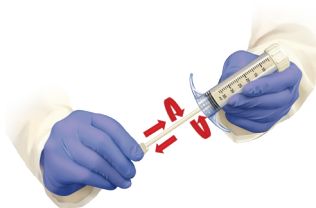

**Hinweis: Die Masse innerhalb von 5 Minuten injizieren.**

6. Den Mischstab **vollständig** zurückziehen und die Mischkappe abnehmen. Die Kolbenhülse wieder am Mischstab anbringen, indem das vordere Ende zuerst auf den Kolben gesetzt wird, bevor man die Hülse einrasten lässt.

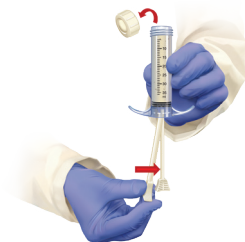

7. Die Einbringspritze mit dem **ORANGEN** Adapter an der Mischspritze anbringen. Der Kolben der Einbringspritze sollte **ganz eingedrückt sein**.



8. Den Kolben der Mischspritze vorsichtig eindrücken, um das Transplantatmaterial in die Einbringspritze zu überführen. Lufteinschlüsse werden dabei beseitigt. Die Schritte 7-8 für weitere Spritzen wiederholen.




9. Die Einbringspritze vom **ORANGEN** Adapter abnehmen und die beiliegende Luer-Kappe und Zubehörkanüle aufsetzen. Das Transplantatmaterial in den Knochendefekt injizieren.



**Hinweis: Das Transplantatmaterial bindet in etwa 20 bis 30 Minuten ab.**

10. (OPTIONAL) Für eine mechanische Unterstützung die Kolbenhülse abnehmen und die Spitze des Mischstabs abbrechen.

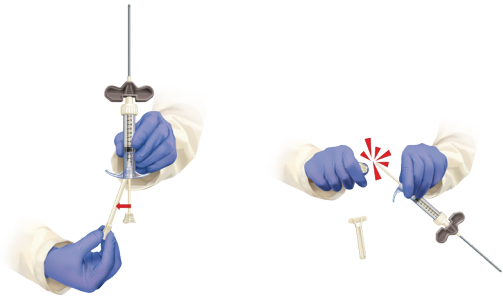

11. (OPTIONAL) Den Schraubantrieb auf dem Mischstab setzen, bis die Mutter beide Vorsprünge an der Spritze erfasst. Den Griff im Uhrzeigersinn drehen, um manuell Transplantatmaterial auszupressen.



**HINWEIS:** Eventuell verbleibt ein Rest des Materials in der Spritze. Wie viel Material in der Spritze zurückbleibt, hängt davon ab, wie genau die Misch- und Injektionszeiten in dieser Anleitung eingehalten wurden.