



PRO-DENSE™-BOTGRAFTSUBSTITUUT

MENGINSTRUCTIES


154101-0

Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Ga voor andere talen naar onze website: www.wright.com. Klik vervolgens op de optie **Prescribing Information** (Voorschrijfinformatie).

Neem voor aanvullende informatie en vertalingen contact op met de fabrikant of de lokale distributeur.

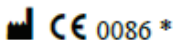

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** De CE-conformiteitsmarkering wordt toegepast naar catalogusnummer en staat op het buitenetiket indien van toepassing.**

R_x ONLY

Juli 2018
Gedrukt in de VS

OPMERKING: Voeg geen extra stoffen aan de graft toe. Gebruik van andere mengoplossingen en/of het toevoegen van andere stoffen aan het mengsel kan de veiligheid, doeltreffendheid en het uitharden van dit product wijzigen.

1. Verwijder het metalen felskapje van de flacon met de oplossing. Bevestig de mengspuit aan de poederhouder met de **RODE** adapter en trek de mengstaaf terug.




2. Draai de houder om en tik erop om AL het poeder in de mengspuit over te brengen. Verwijder de poederhouder.




3. Verwijder de flaconstop en voeg de HELE oplossing toe aan de mengspuit.



4. Verwijder de **RODE** adapter en bevestig de **WITTE** mengdop. Verwijder de zuigerhuls door eerst het uiteinde met de handgreep van de mengstaaf los te maken.

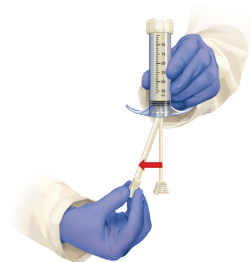

5. Meng het geheel gedurende 30 seconden door de mengstaaf al draaiend op en neer te bewegen. **Zorg dat dat de 'poederstop' bij de achter- en voorkant van de spuit uit elkaar valt en wordt meegenomen.**

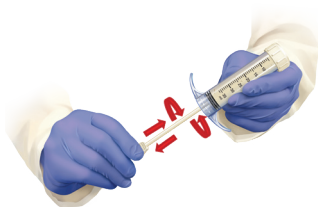

Opmerking: Injecteer de pasta in 5 minuten.

6. Trek de mengstaaf **volledig** terug en verwijder de mengdop. Bevestig de zuigerhuls opnieuw aan de mengstaaf door eerst het voorste uiteinde op de piston te positioneren alvorens de huls vast te klikken.



7. Sluit de aanbrengruis aan op de mengspuit met de **ORANJE** adapter. De zuiger van de aanbrengruis moet **volledig neergedrukt** zijn.



8. Duw voorzichtig op de zuiger van de mengspuit om de graft in de aanbrengruis over te brengen. Ingesloten lucht verdwijnt tijdens het overbrengen. Herhaal stap 7-8 voor extra spuiten.




9. Maak de aanbrengrspuit los van de **ORANJE** adapter en bevestig de meegeleverde luerdop en accessoirenaald. Injecteer de graft in het botdefect.



Opmerking: De graft hardt uit in ongeveer 20-30 minuten.

10. (OPTIONEEL) Verwijder de zuigerhuls en breek de tip van de mengstaaf af voor mechanische hulp.

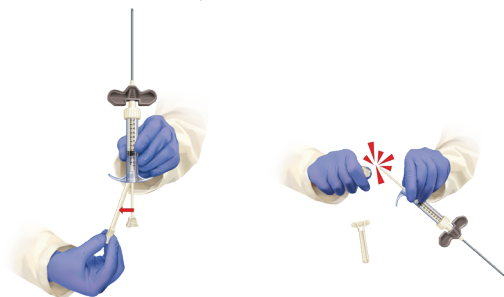

11. (OPTIONEEL) Breng de spilaandrijving over de mengstaaf in totdat u hoort dat de spilmoer koppelt met beide lipjes op de spuit. Draai de handgreep rechtsom om de graft handmatig te extruderen.



OPMERKING: Er kunnen materiaalresten in de spuit achterblijven. De hoeveelheid achterblijvend materiaal hangt af van de mate waarin de gebruiker zich houdt aan de in deze gebruiksaanwijzing vermelde meng- en extrusietijd.