



## SUBSTITUTO DE ENXERTO ÓSSEO PRO-DENSE™


### INSTRUÇÕES DE MISTURA 154101-0

**Neste pacote estão incluídos os seguintes idiomas:**

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Para mais idiomas, visite o nosso website [www.wright.com](http://www.wright.com). Em seguida, clique na opção **Prescribing Information** (Informações de prescrição).

**Para obter mais informações e as traduções, contacte o fabricante ou o distribuidor local.**

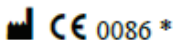

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* A marcação CE de conformidade é aplicada de acordo com o número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável.**

**R ONLY**

Julho de 2018  
Impresso nos EUA

**NOTA:** não adicione quaisquer outras substâncias ao enxerto. A utilização de soluções de mistura alternativas e/ou a adição de outras substâncias à mistura pode alterar a segurança, a eficácia e endurecimento deste produto.

1. Retire o engaste metálico do frasco da solução. Ligue a seringa misturadora ao recipiente de pó com o adaptador **VERMELHO** e puxe a haste misturadora para trás.



2. Inverta o recipiente e bata suavemente para transferir **TUDO** o pó para a seringa misturadora. Retire o recipiente de pó.




3. Retire a rolha do frasco e transfira TODA a solução para dentro da seringa misturadora.



4. Retire o adaptador VERMELHO e coloque a tampa misturadora BRANCA. Retire a manga do êmbolo, começando por separar a extremidade da pega da haste misturadora.




5. Misture durante 30 segundos movendo a haste misturadora para dentro e para fora, ao mesmo tempo que roda. **Certifique-se de que desfaz e incorpora o "rolhão" de pó perto da parte da frente e de trás da seringa.**

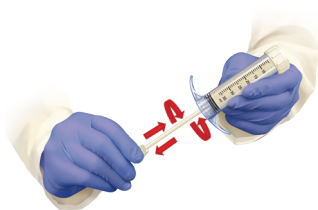

**Nota: Injete a pasta no espaço de 5 min.**

6. Puxe **completamente** para trás a haste misturadora e retire a tampa misturadora. Volte a ligar a manga do êmbolo à haste misturadora, posicionando primeiro a extremidade frontal no pistão, antes de encaixar no lugar.

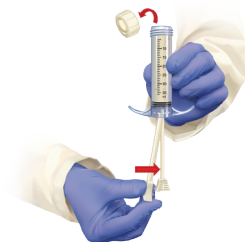

7. Ligue a seringa aplicadora à seringa misturadora com o adaptador **LARANJA**. O êmbolo da seringa aplicadora deve estar **totalmente introduzido**.



8. Empurre com cuidado o êmbolo da seringa misturadora para transferir o enxerto para dentro da seringa aplicadora. O ar encarcerado será removido durante a transferência. Repita os passos 7-8 para seringas adicionais.




9. Desligue a seringa aplicadora do adaptador **LARANJA** e ligue a tampa luer e a agulha acessória fornecidas. Injete o enxerto no defeito ósseo.



**Nota: O enxerto endurecerá em aproximadamente 20-30 min.**

10. (OPCIONAL) Para assistência mecânica, retire a manga do êmbolo e parta a ponta da haste misturadora.

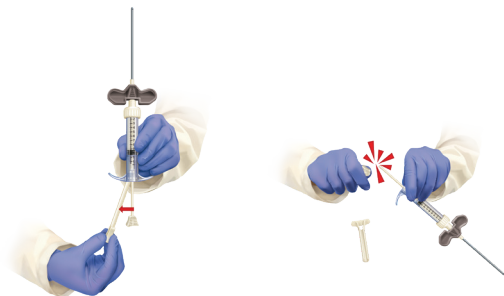

11. (OPCIONAL) Insira o acionador de fuso por cima da haste misturadora até ouvir a porca do fuso engatar com ambas as asas da seringa. Rode a pega no sentido horário para injetar enxerto manualmente.



**NOTA:** poderá ficar material residual na seringa. A quantidade de material restante tem a ver com a observância, por parte do utilizador, dos tempos de mistura e ejeção descritos nestas instruções.