



# PRO-DENSE™ BENGRAFTSUBSTITUT

## BLANDNINGSANVISNINGAR

### 154101-0

#### Följande språk ingår i detta paket:


English (en)    Deutsch (de)    Nederlands (nl)    Français (fr)  
Español (es)    Italiano (it)    Português (pt)    Türkçe (tk)

För ytterligare språk ska du besöka vår webbplats på [www.wright.com](http://www.wright.com).

Klicka sedan på alternativet **Prescribing Information**

(förskrivningsinformation).

**För ytterligare information och översättningar ska du kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare.**

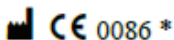

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* CE-märkningen för överensstämmelse tillämpas i enlighet med katalognummer och visas på ytteretiketten, om tillämpligt.**

R<sub>x</sub> ONLY

Juli 2018  
Tryckt i USA.

**OBS!** Tillsätt inga ytterligare ämnen till graftet. Användning av alternativa blandningslösningar och/eller tillsats av andra ämnen till blandningen kan försämra produktens säkerhet, effektivitet och stelandet av denna produkt.

1. Ta bort metalltång från flaska för lösning. Sätt fast blandningsspruta till pulverbehållare med **RÖD** adapter och dra tillbaka blandningsstaven.



2. Vänd behållaren upp och ner för att överföra ALLT pulver in till blandningssprutan. Ta bort pulverbehållare.




3. Ta bort flaskproppen och tillsätt ALL lösning till blandings sprutan.



4. Ta bort RÖD adapter och sätt fast VIT blandingshylsa. Ta bort kolvhylsan genom att koppla bort handtagets ände från blandningsstaven först.




5. Blanda i 30 sekunder genom att röra blandningsstaven fram och tillbaka medan du roterar den. **Se till att bryta upp och inkorporera pulver-”pluggen” nära bak- och framsidan av sprutan.**

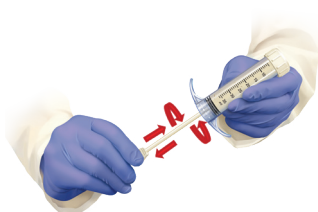

**OBS! Injicera pastan inom 5 min.**

6. Dra tillbaka blandningsstaven **fullständigt** och ta bort blandningshylsan. Sätt fast kolvhylsan till blandningsstaven igen genom att placera främre ändan till kolven först, innan du klickar in den i rätt läge.

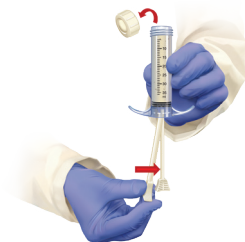

7. Koppla tillförselspruta till blandningspruta med **ORANGE** adapter. Tillförselsprutans kolv ska vara **helt nedtryckt**.



8. Tryck försiktigt blandningsprutans kolv för att överföra graften till tillförselsprutan. Instängd luft kommer tas bort under överföring. Repetera steg 7-8 för ytterligare sprutor.




9. Koppla bort tillförselsprutan från den **ORANGE** adaptern och sätt fast den medföljande luerhysan och tillbehörsnålen. Injicera graft in i bendefekten.



**OBS! Graftet stelnar på cirka 20-30 min.**

10. (VALFRITT) För mekaniskt understöd, ta bort kolvhylsan och knäpp loss spetsen av blandningsstaven.

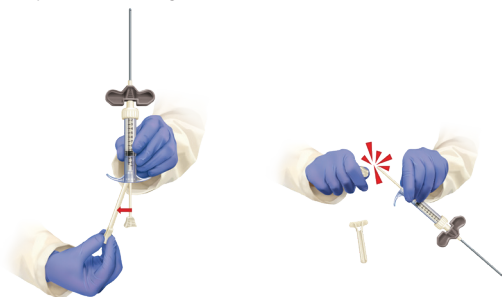

11. (VALFRITT) Sätt in spindeldrivingen över blandningsstaven till dess att du hör spindelmuttern koppla ihop med båda flikarna på sprutan. Vrid handtaget medurs för att dra ut graft manuellt.



**OBS!** Kvarvarande material kan lämnas i sprutan. Mängden kvarvarande material står i relation till hur användaren följer tiderna för att blanda och trycka ut graftet i dessa anvisningar.