



PRO-DENSE™ KEMİK GREFTİ YEDEĞİ

KARIŞTIRMA TALİMATI

154101-0


Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk)

Ek diller için www.wright.com web sitemizi ziyaret edin. Sonra

Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneği üzerine tıklayın.

Ek bilgi ve tercüme için lütfen üretici veya yerel distribütör ile irtibat kurun.

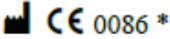

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** CE Uyumluluk İşareti katalog numarası başına uygulanır ve eğer varsa dış etikette görünür.**

R ONLY

Temmuz 2018
A.B.D.'de basılmıştır.

PRO-DENSE™ KEMİK GREFTİ YEDEĞİ (154101-0)

TK

NOT: Grefte herhangi bir ek madde eklemeyin. Alternatif karıştırma solüsyonları kullanılması ve/veya karışıma diğer maddeler eklenmesi bu ürünün güvenlik, etkinlik ve sertleşmesini değiştirebilir.

1. Solüsyon şişesinden metal kıvrımı çıkarın. Karıştırma şırıngasını **KIRMIZI** adaptörlü toz kabına takın ve karıştırma çubuğunu geri çekin.



2. Kabı ters çevirin ve TÛM tozları şırınganın içine aktarmak için hafifçe vurun. Toz kabını çıkarın.




3. Şişe tapasını çıkarın ve TÜM solüsyonu karıştırma şırıngasına ekleyin.



4. **KIRMIZI** adaptörü çıkarın ve **BEYAZ** karıştırma kapağını takın. Kol ucunu önce karıştırma çubuğundan ayırmak suretiyle piston kolunu sökün.



5. Dönerken, karıştırma çubuğunu ileri geri hareket ettirerek 30 saniye karıştırın. **Toz 'tıkaçını' şırınganın arkasına ve önüne yakın bir yerinde kırıp birleştirdiğinizden emin olun.**

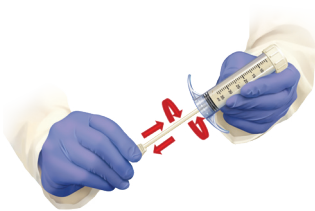

Not: Macunu 5 dakika içinde enjekte edin.

6. **Tamamen** karıştırma çubuğunu geri çekin ve karıştırma kapağını çıkarın. Piston kolunu, yerine oturtmadan önce ön ucu piston üzerine yerleştirerek karıştırma çubuğuna tekrar takın.



7. **TURUNCU** adaptör ile iletme şiringasını karıştırma şiringasına bağlayın. İletme şiringasının pistonu **tamamen deprese edilmelidir.**



8. Grefti iletme şiringasının içine aktarmak için yavaşça karıştırma şiringasının pistonunu itin. Aktarma sırasında sıkışmış hava çıkacaktır. Ek şiringalar için 7-8 arası adımları tekrarlayın.




9. İletme şırıngasını **TURUNCU** adaptörden ayırın ve sağlanan luer kapağını ve aksesuar iğnesini takın. Grefti kemik defektine enjekte edin.



Not: Greft ~ 20 - 30 dakikada sertleşir.

10. (İSTEĞE BAĞLI) Mekanik yardım için, piston kolunu çıkarın ve karıştırma çubuğunun ucunu koparın.

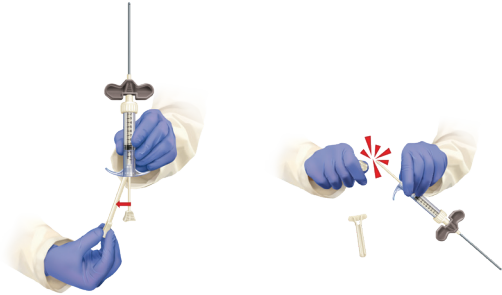

11. (İSTEĞE BAĞLI) İğ somunu, şırınganın her iki tırnağıyla birleşene kadar iğ sürücüsünü karıştırma çubuğunun üzerine yerleştirin. Grefti elle çıkarmak için kolu saat yönünde döndürün.



NOT: Bir miktar materyal şırıngada kalabilir. Kalan materyal miktarı kullanıcının bu talimatta ana hatları verilen karıştırma ve enjeksiyon sürelerine uyumuna bağlıdır.