



PRO-DENSE™ KNOGLETRANSPLANTAT

BLANDEINSTRUKTIONER


154101-1

Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Besøg vores websted på www.wright.com for yderligere sprog. Klik derefter på valgmuligheden **Prescribing Information** (Ordinationsoplysninger).

Kontakt producenten eller den lokale forhandler for at få yderligere oplysninger og oversættelser.

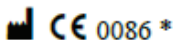

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant.**

R_x ONLY

Juli 2018
Trykt i USA

BEMÆRK: Tilsæt ikke yderligere stoffer til transplantatet. Brug af andre blandingsopløsninger og/eller tilsætning af andre stoffer til blandingen kan ændre produktets sikkerhed, effektivitet og hærdning.

1. Fjern metalkraven fra hætteglasset med opløsningen. Sæt blandesprøjten fast på pulverbeholderen med **RØD** adapter, og træk blandestaven tilbage.




2. Vend beholderen på hovedet, og bank let på den for at overføre ALT pulver til blandesprøjten. Fjern pulverbeholderen.




3. Fjern hætteglassets prop, og hæld AL opløsning i blandesprøjten.



4. Fjern den RØDE adapter, og sæt den HVIDE blanderhætte på. Fjern stempelhylsteret ved først at adskille håndtagsenden fra blandestaven.

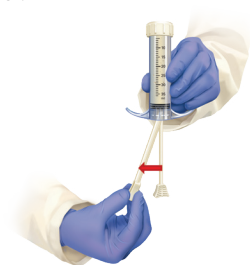


5. Bland i 30 sekunder ved at bevæge blandestaven ud og ind, samtidig med at den roteres. **Sørg for at bryde pulver-“proppen” i sprøjtenes for- og bagende og inkorporere den.**

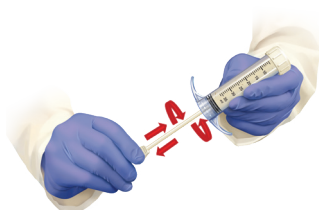

Bemærk: Injicér massen i løbet af 5 min.

6. Træk blandestaven **helt** tilbage, og fjern blandehætten. Sæt stempelhylsteret tilbage på blandestaven ved først at sætte den forreste ende på stemplet, inden hylsteret klikkes på plads.

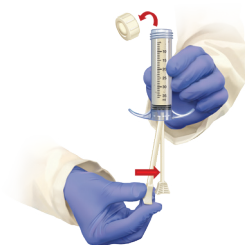

7. Kobl indføringsprøjten til blandesprøjten vha. den **ORANGE** adapter. Indføringsprøjtenes stempel skal være **trykket helt ned**.



8. Tryk forsigtigt på blandesprøjtenes stempel for at overføre transplantatet til indføringsprøjten. På denne måde fjernes indelukket luft under overførslen. Gentag trin 7-8 for yderligere sprøjter.




9. Kobl indføringssprøjten fra den **ORANGE** adapter, og påsæt den vedlagte luerhætte og kanyle. Injicér protesemateriale ind i knogledefekten.



Bemærk: Transplantatet vil størkne i løbet af ca. 20-30 min.

10. (VALGFRIT) Som mekanisk hjælp kan stempelhylsteret fjernes, og spidsen af blandestaven knækkes af.

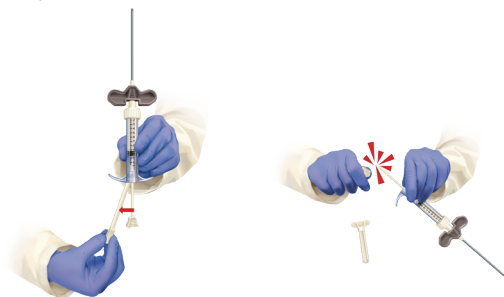

11. (VALGFRIT) Sæt drivspindelen over blandestaven, indtil du hører, at spindelmotrikken låser fast på begge greb på sprøjten. Drej håndtaget med uret for at udstøde transplantatet manuelt.



BEMÆRK: Der kan være restmateriale tilbage i sprøjten. Mængden af restmateriale afhænger af brugerens overholdelse af de blande- og injiceringstider, der er angivet i disse instruktioner.