



SUSTITUTO DE INJERTO ÓSEO PRO-DENSE™

INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA


154101-1

Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wright.com y haga clic en la opción **Prescribing Information** (Información para la prescripción).

Para información y traducciones adicionales, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.

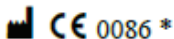

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** La marca de conformidad CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.**

R_x ONLY

Julio de 2018
Impreso en EE. UU.

NOTA: No añada ninguna otra sustancia al injerto. El uso de otras soluciones de mezclado o la adición de otras sustancias a la mezcla podrían afectar a la seguridad, a la eficacia y al fraguado de este producto.

1. Retire el cierre metálico del vial de solución. Acople la jeringa de mezcla al recipiente de polvo con adaptador **ROJO** y tire de la varilla de mezcla hacia atrás.



2. Invierta el recipiente y golpéelo suavemente para transferir **TODO** el polvo a la jeringa de mezcla. Retire el recipiente de polvo.




3. Retire el tapón del vial y añada TODA la solución a la jeringa de mezcla.



4. Retire el adaptador ROJO y acople la tapa de mezcla BLANCA. Retire el manguito del émbolo desconectando el extremo del mango de la varilla de mezcla primero.




5. Mezcle durante 30 segundos moviendo la varilla de mezcla hacia delante y hacia atrás mientras la hace girar. **Asegúrese de romper e incorporar el «tapón» de polvo cerca de la parte trasera y delantera de la jeringa.**

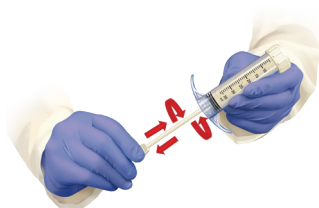

Nota: Inyecte la pasta en un plazo de 5 minutos.

6. Tire de la varilla de mezcla hacia atrás **hasta el tope** y retire la tapa de mezcla. Vuelva a acoplar el manguito del émbolo sobre la varilla de mezcla colocando el extremo delantero sobre el pistón primero antes de encajarlo en su sitio.

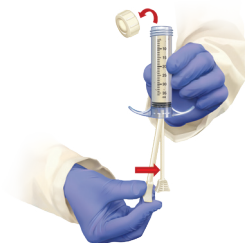

7. Conecte la jeringa de aplicación a la jeringa de mezcla con adaptador **NARANJA**. El émbolo de la jeringa de aplicación deberá **presionarse hasta el tope**.



8. Empuje suavemente el émbolo de la jeringa de mezcla para transferir el injerto a la jeringa de aplicación. El aire atrapado se expulsará durante la transferencia. Repita los pasos 7 y 8 con otras jeringas.




9. Desconecte la jeringa de aplicación del adaptador **NARANJA** y acople la tapa Luer y la aguja accesoria suministradas. Inyecte injerto en el defecto óseo.



Nota: El injerto fragua en unos 20 - 30 min.

10. (OPCIONAL) Para obtener ayuda mecánica, retire el manguito del émbolo y desprenda la punta de la varilla de mezcla.

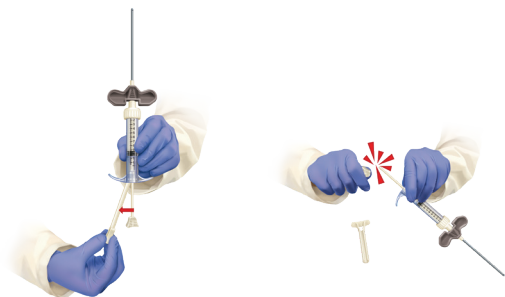

11. (OPCIONAL) Inserte el eje de accionamiento sobre la varilla de mezcla hasta que oiga que la tuerca del eje encaja con las dos lengüetas de la jeringa. Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj para expulsar manualmente injerto.



NOTA: Pueden quedar restos de material en la jeringa. La cantidad de material restante depende del cumplimiento por parte del usuario de los tiempos de mezclado y expulsión indicados en estas instrucciones.