



SUBSTITUTO DE ENXERTO ÓSSEO PRO-DENSE™

INSTRUÇÕES DE MISTURA


154101-1

Neste pacote estão incluídos os seguintes idiomas:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Para mais idiomas, visite o nosso website www.wright.com. Em seguida, clique na opção **Prescribing Information** (Informações de prescrição).

Para obter mais informações e as traduções, contacte o fabricante ou o distribuidor local.

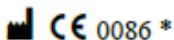

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** A marcação CE de conformidade é aplicada de acordo com o número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável.**

R ONLY

Julho de 2018
Impresso nos EUA

NOTA: não adicione quaisquer outras substâncias ao enxerto. A utilização de soluções de mistura alternativas e/ou a adição de outras substâncias à mistura pode alterar a segurança, a eficácia e endurecimento deste produto.

1. Retire o engaste metálico do frasco da solução. Ligue a seringa misturadora ao recipiente de pó com o adaptador **VERMELHO** e puxe a haste misturadora para trás.



2. Inverta o recipiente e bata suavemente para transferir **TUDO** o pó para a seringa misturadora. Retire o recipiente de pó.




3. Retire a rolha do frasco e transfira TODA a solução para dentro da seringa misturadora.



4. Retire o adaptador VERMELHO e coloque a tampa misturadora BRANCA. Retire a manga do êmbolo, começando por separar a extremidade da pega da haste misturadora.




5. Misture durante 30 segundos movendo a haste misturadora para dentro e para fora, ao mesmo tempo que roda. **Certifique-se de que desfaz e incorpora o "rolhão" de pó perto da parte da frente e de trás da seringa.**

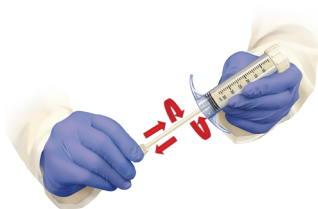

Nota: Injete a pasta no espaço de 5 min.

6. Puxe **completamente** para trás a haste misturadora e retire a tampa misturadora. Volte a ligar a manga do êmbolo à haste misturadora, posicionando primeiro a extremidade frontal no pistão, antes de encaixar no lugar.

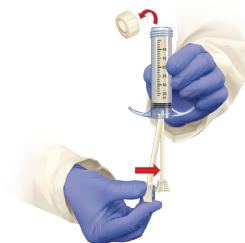

7. Ligue a seringa aplicadora à seringa misturadora com o adaptador **LARANJA**. O êmbolo da seringa aplicadora deve estar **totalmente introduzido**.



8. Empurre com cuidado o êmbolo da seringa misturadora para transferir o enxerto para dentro da seringa aplicadora. O ar encarcerado será removido durante a transferência. Repita os passos 7-8 para seringas adicionais.




9. Desligue a seringa aplicadora do adaptador **LARANJA** e ligue a tampa luer e a agulha acessória fornecidas. Injete o enxerto no defeito ósseo.



Nota: O enxerto endurecerá em aproximadamente 20-30 min.

10. (OPCIONAL) Para assistência mecânica, retire a manga do êmbolo e parta a ponta da haste misturadora.

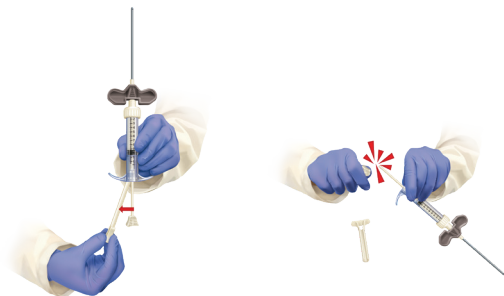

11. (OPCIONAL) Insira o acionador de fuso por cima da haste misturadora até ouvir a porca do fuso engatar com ambas as asas da seringa. Rode a pega no sentido horário para injetar enxerto manualmente.



NOTA: poderá ficar material residual na seringa. A quantidade de material restante tem a ver com a observância, por parte do utilizador, dos tempos de mistura e ejeção descritos nestas instruções.