



# PRO-DENSE™ KNOGLETRANSPLANTAT

## BLANDEINSTRUKTIONER


### 154103-0

**Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:**

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Besøg vores websted på [www.wright.com](http://www.wright.com) for yderligere sprog. Klik derefter på valgmuligheden **Prescribing Information** (Ordinationsoplysninger).

**Kontakt producenten eller den lokale forhandler for at få yderligere oplysninger og oversættelser.**

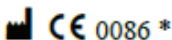

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant.**

**Rx ONLY**

Juli 2018  
Trykt i USA

**BEMÆRK:** Tilsæt ikke yderligere stoffer til transplantatet. Brug af andre blandingsopløsninger og/eller tilsætning af andre stoffer til blandingen kan ændre produktets sikkerhed, effektivitet og hærdning.

1. Tag låget af blanderen, og tilsæt alt pulveret til skålen.



2. Tilsæt al opløsning til skålen.



3. Sæt låget tilbage på blanderen, og bland kraftigt i 30 sekunder (ca. 50 omdrejninger)



**Bemærk: Injicér massen i løbet af 5 min.**

4. Tag låget af, og pak transplantatet ned på det ønskede sted med den lille spatel, der er vedlagt til formålet.



5. (VALGFRIT) Fyld sprøjten med transplantat ved brug af den store spatel. Vend sprøjten og bank den let mod bordet for at hjælpe med at komprimere transplantatet.



6. Sæt den vedlagte luerhætte og kanyle på.



7. Før spindelstaven med gevind ind bagest på sprøjten. Drej på håndtaget for at injicere transplantatmateriale.



**Bemærk: Transplantatet vil størkne i løbet af ca. 20-30 min.**

**Bemærk:** Der kan være restmateriale tilbage i sprøjten. Mængden af restmateriale afhænger af brugerens overholdelse af de blande- og injiceringstider, der er angivet i disse instruktioner.