



# ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ PRO-DENSE™

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

### 154103-1


**Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:**

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της εταιρείας μας [www.wright.com](http://www.wright.com). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί

**Prescribing Information** (Πληροφορίες συνταγογράφησης).

**Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις.**

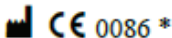

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* Η σήμανση συμμόρφωσης CE ισχύει σύμφωνα με τον αριθμό καταλόγου και εμφανίζεται στην εξωτερική ετικέτα, εάν υπάρχει.**

**Rx ONLY**

Ιούλιος 2018  
Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ  
PRO-DENSE™  
(154103-1)**

EL

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην προσθέτετε άλλες ουσίες στο μόσχευμα. Η χρήση εναλλακτικών διαλυμάτων ανάμειξης ή/και η προσθήκη άλλων ουσιών στο μείγμα ενδέχεται να μεταβάλει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη στερεοποίηση αυτού του προϊόντος.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από τον μίκτη και προσθέστε όλη την σκόνη στο δοχείο.



2. Προσθέστε όλο το διάλυμα στο δοχείο.



3. Επανατοποθετήστε το καπάκι του μίκτη και αναμείξτε έντονα για 30 δευτερόλεπτα (περίπου 50 περιστροφές)



**Σημείωση: Χορηγήστε την πάστα εντός 5 λεπτών.**

4. Αφαιρέστε το επάνω μέρος και πακτώστε το μόςχευμα στην επιθυμητή περιοχή, χρησιμοποιώντας τη μικρή σπάτουλα που παρέχεται για τη διανομή του μοςχεύματος.



5. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) Πληρώστε τη σύριγγα με υλικό του μοςχεύματος, χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη σπάτουλα. Σε ανεστραμμένη θέση, χτυπήστε ελαφρά στο τραπέζι για να συμβάλλετε στη σκλήρυνση του μοςχεύματος.



6. Προσαρτήστε το παρεχόμενο πώμα luer και την κάνουλα.



7. Εισάγετε τη ράβδο της ατράκτου με το σπείρωμα διαμέσου του πίσω μέρους της σύριγγας. Περιστρέψτε τη λαβή για να εγχύσετε το μόσχευμα.



**Σημείωση: Το μόσχευμα θα στερεοποιηθεί σε ~20 - 30 λεπτά.**

**Σημείωση:** Ενδέχεται να παραμείνουν στη σύριγγα υπολείμματα υλικού. Το ποσό του υπολείμματος του υλικού σχετίζεται με την πιστή εφαρμογή από το χρήστη των χρόνων ανάμειξης και έγχυσης που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.