



SUBSTITUT OSSEUX PRO-DENSE™

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE


154103-1

Les langues suivantes sont incluses dans ce paquet :

| | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| English (en) | Deutsch (de) | Nederlands (nl) | Français (fr) |
| Español (es) | Italiano (it) | Português (pt) | Türkçe (tk) |

Pour d'autres langues, visiter notre site web www.wright.com. Puis cliquer sur l'option **Prescribing Information** (Informations de prescription).

Pour des informations et traductions complémentaires, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local.

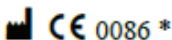

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

| | |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** Le marquage CE de conformité est utilisé par numéro de catalogue et apparaît sur l'étiquette externe, le cas échéant.**

Rx ONLY

Juillet 2018
Imprimé aux États-Unis.

REMARQUE : Ne pas ajouter de substances supplémentaires à la greffe.
L'utilisation d'autres solutions de mélange ou l'ajout d'autres substances au mélange peuvent altérer l'innocuité, l'efficacité et la prise de ce produit.

1. Retirer le couvercle du mélangeur et ajouter toute la poudre dans le bol.



2. Ajouter toute la solution dans le bol.



3. Remettre le couvercle du mélangeur et mélanger vigoureusement pendant 30 secondes (environ 50 tours)



Remarque : Administrer la pâte dans les 5 minutes.

4. Ôter le couvercle et poser la greffe à l'endroit choisi à l'aide de la petite spatule fournie pour l'implantation du greffon.



5. (FACULTATIF) Remplir la seringue avec le matériau de greffe en utilisant la spatule la plus large. En position inversée, tapoter sur la table pour faciliter une greffe compacte.



6. Fixer le bouchon luer et la canule fournis.



7. Insérez la tige de la broche filetée par l'arrière de la seringue. Tourner la poignée pour injecter la greffe.



**Remarque : La prise de la greffe intervient
en 20 à 30 minutes environ.**

Remarque : Le matériau résiduel peut être laissé dans la seringue. La quantité de matériau restant dépend du respect par l'utilisateur des durées de mélange et d'injection indiquées dans ces instructions.