



SUBSTITUTO DE ENXERTO ÓSSEO PRO-DENSE™

INSTRUÇÕES DE MISTURA


154103-1

Neste pacote estão incluídos os seguintes idiomas:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Para mais idiomas, visite o nosso website www.wright.com. Em seguida, clique na opção **Prescribing Information** (Informações de prescrição).

Para obter mais informações e as traduções, contacte o fabricante ou o distribuidor local.

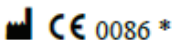

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** A marcação CE de conformidade é aplicada de acordo com o número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável.**

R ONLY

Julho de 2018
Impresso nos EUA

NOTA: não adicione quaisquer outras substâncias ao enxerto. A utilização de soluções de mistura alternativas e/ou a adição de outras substâncias à mistura pode alterar a segurança, a eficácia e endurecimento deste produto.

1. Retire a tampa do misturador e transfira todo o pó para a taça.



2. Adicione toda a solução à taça.



3. Volte a colocar a tampa do misturador e misture vigorosamente durante 30 segundos (aprox. 50 rotações)



Nota: Aplique a pasta no espaço de 5 min.

4. Retire a tampa e acondicione o enxerto na área pretendida utilizando a espátula pequena fornecida para aplicação do enxerto.



5. (OPCIONAL) Encha a seringa com o material de enxerto utilizando a espátula maior. Em posição invertida, bata na mesa para ajudar a compactar o enxerto.



6. Ligue a tampa luer e a cânula fornecidas.



7. Insira a haste para coluna roscada através da parte de trás da seringa. Rode a pega para injetar o enxerto.



Nota: O enxerto endurecerá em aproximadamente 20-30 min.

Nota: poderá ficar material residual na seringa. A quantidade de material restante tem a ver com a observância, por parte do utilizador, dos tempos de mistura e ejeção descritos nestas instruções.