



PRO-DENSE™ BENGRAFTSUBSTITUT

BLANDNINGSANVISNINGAR


154103-1

Följande språk ingår i detta paket:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

För ytterligare språk ska du besöka vår webbplats på www.wright.com. Klicka sedan på alternativet **Prescribing Information** (förskrivningsinformation).

För ytterligare information och översättningar ska du kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare.

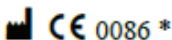

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** CE-märkningen för överensstämmelse tillämpas i enlighet med katalognummer och visas på ytteretiketten, om tillämpligt.**

Rx ONLY

Juli 2018
Tryckt i USA.

**PRO-DENSE™ BENGRAFTSUBSTITUT
(154103-1)**

SV

OBS! Tillsätt inga ytterligare ämnen till graftet. Användning av alternativa blandningslösningar och/eller tillsats av andra ämnen till blandningen kan försämra produktens säkerhet, effektivitet och stelandet av denna produkt.

1. Ta bort locket från blandaren och tillsätt allt pulver i skålen.



2. Tillsätt all lösning i skålen.



3. Sätt på blandarens lock igen och mixa kraftfullt i 30 sekunder (ungefär 50 varv)



OBS! Tillför pasta inom 5 min.

4. Ta bort locket och packa in graften i det önskade området genom att använda den lilla spateln som medföljer för grafftillförel.



5. (VALFRITT) Fyll sprutan med graftmaterial med hjälp av den större spateln. Knacka på bordet i upp och nervänd position för att hjälpa till att trycka ihop graften.



6. Sätt fast medföljande luerhylsa och kanyl.



7. Sätt in den trädde spindelstaven genom baksidan av sprutan. Vrid handtaget för att injicera graft.



OBS! Graftet stelnar på cirka 20-30 min.

OBS! Kvarvarande material kan lämnas i sprutan. Mängden kvarvarande material står i relation till hur användaren följer tiderna för att blanda och trycka ut graftet i dessa anvisningar.