



# PRO-DENSE™ KEMİK GREFTİ YEDEĞİ

## KARIŞTIRMA TALİMATI

### 154103-1


**Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:**

English (en)      Deutsch (de)      Nederlands (nl)      Français (fr)  
Español (es)      Italiano (it)      Português (pt)      Türkçe (tk)

Ek diller için [www.wright.com](http://www.wright.com) web sitemizi ziyaret edin. Sonra

**Prescribing Information** (Reçeteleme Bilgisi) seçeneği üzerine tıklayın.

**Ek bilgi ve tercüme için lütfen üretici veya yerel distribütör ile irtibat kurun.**

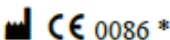

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC REP

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* CE Uyumluluk İşareti katalog numarası başına uygulanır ve eğer varsa dış etikette görünür.**

**R ONLY**

Temmuz 2018  
A.B.D.'de basılmıştır.

**PRO-DENSE™ KEMİK GREFTİ YEDEĞİ  
(154103-1)**

TK

**NOT:** Grefte herhangi bir ek madde eklemeyin. Alternatif karıştırma solüsyonları kullanılması ve/veya karışıma diğer maddeler eklenmesi bu ürünün güvenlik, etkinlik ve sertleşmesini değiştirebilir.

1. Karıştırıcının kapağını çıkarın ve tüm tozu kaseye ekleyin.



2. Tüm çözeltiyi kaseye ekleyin.



3. Mikser kapađını deđiřtirin ve 30 saniye boyunca kuvvetlice karıřtırın (yaklařık 50 devir)



**Not: 5 dakika iinde macunu iletin.**

4. Kapađı ıkarın ve greft iletimi iin sađlanan kk spatulayı kullanarak grefti istenen alana yerleřtirin.



5. (İSTEĐE BAĐLI) řıringayı daha bk spatula kullanarak greft materyali ile doldurun. Ters konumda, kompakt grefte yardımcı olmak iin masaya hafife vurun.



6. Sağlanan luer kapağını ve kanülü takın.



7. Dişli mil çubuğunu şırınganın arkasına takın. Greft enjekte etmek için kolu döndürün.



**Not: Greft ~ 20 - 30 dakikada sertleşir.**

**Not:** Bir miktar materyal şırıngada kalabilir. Kalan materyal miktarı kullanıcının bu talimatta ana hatları verilen karıştırma ve enjeksiyon sürelerine uyumuna bağlıdır.